



Báscula para bebés

MANUAL DE USO

MS5900



Mantenga el manual de instrucciones a mano y siga las instrucciones de uso.

CONTENIDO

I. Explicación de textos/símbolos en la etiqueta/embalaje	1
II. Aviso de derechos de autor	3
III. Notas de seguridad	4
A. Información general	4
B. Directrices EMC y declaración del fabricante	7
IV. Instalación	11
A. Tallímetro accesorio	11
B. Inserción de pilas	13
C. Uso del adaptador de CA	13
V. Indicadores y funciones de las teclas	14
VI. Uso del dispositivo	15
VII. Conexión inalámbrica	18
VIII. Configuración del dispositivo	19
IX. Solución de problemas	21
X. Especificaciones del producto	24
A. Especificaciones del producto	24
B. Información sobre el adaptador de corriente	25
XI. Declaración de conformidad del Fabricante	26

I. Explicación de textos/símbolos en la etiqueta/embalaje

Texto/Símbolo	Significado
	Precaución. El incumplimiento de las instrucciones puede dar lugar a eventos adversos.
	Recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE. No deseche el dispositivo junto con la basura habitual.
	Nombre y dirección del fabricante
	Lea atentamente el manual del usuario antes de la instalación y el uso, y siga las instrucciones de uso.
	Dispositivo médico eléctrico, pieza aplicada tipo B
REF	Número de catálogo del dispositivo
EU REP	Nombre y dirección del representante autorizado en la Unión Europea
MD	Es un dispositivo médico.
LOT	Número de lote o de serie del fabricante del dispositivo
SN	Número de serie del dispositivo
#	Número de modelo del dispositivo
UDI	Identificador único del dispositivo (UDI) (01) GTIN (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie
e	Intervalo de escala de verificación. Valor expresado en unidades de masa. Utilizado para clasificar y verificar un instrumento
CE 2460	El dispositivo cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. El número de cuatro dígitos es el identificador del organismo notificado de productos sanitarios.
CE	El dispositivo declara su conformidad con las regulaciones esenciales establecidas por la legislación pertinente de la Unión Europea.

 M17 0122	El dispositivo cumple con las directivas UE M: Etiqueta de conformidad según la Directiva 2014/31/UE para instrumentos de pesaje no automáticos 17: Año en que se realizó la verificación de conformidad y se aplicó la etiqueta CE. (ej: 17=2017) 0122: Identificador del organismo notificado de metrología
	El dispositivo es una báscula de Clase III conforme a la Directiva 2014/31/UE
	Nombre y dirección de la entidad que importa el dispositivo
	Nombre y dirección de la entidad responsable de la traducción de la información de uso
CON.	Contador de eventos que registra cuántas veces se han realizado ajustes de parámetros en modo protegido relacionados con las características metrológicas (p. ej., el valor de la gravedad) en el dispositivo.
	El dispositivo cumple con la aprobación de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán (NCC)
	El dispositivo cumple con las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.
	El dispositivo cumple con toda la legislación de productos aplicable en el Reino Unido
	Polaridad de la alimentación del dispositivo. Polaridad de la alimentación del dispositivo.

En caso de discrepancias, prevalece el icono en el propio dispositivo.

II. Aviso de derechos de autor

Aviso de derechos de autor

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Sitio web: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Este manual de usuario está protegido por la ley internacional de derechos de autor. Todo el contenido está licenciado, y su uso está sujeto a la autorización escrita de Charder Electronic Co., Ltd. (en adelante Charder) Charder no se hace responsable de los daños causados por no cumplir con los requisitos establecidos en este manual. Charder se reserva el derecho de corregir errores tipográficos en el manual sin previo aviso, y de modificar el exterior del dispositivo por razones de calidad sin el consentimiento del cliente.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

III. Notas de seguridad

A. Información general

Gracias por elegir este dispositivo médico de Charder. Está diseñado para ser fácil y sencillo de operar, pero si encuentra algún problema que no se aborde en este manual, póngase en contacto con su socio de servicio local de Charder.

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, lea atentamente este manual del usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Contiene instrucciones importantes sobre la instalación, el uso adecuado y el mantenimiento.

Uso previsto

Este dispositivo médico está diseñado para ser utilizado de acuerdo con las normativas nacionales, para medir el peso dentro de las especificaciones, para un uso relacionado con el peso por profesionales.

Para mantener la coherencia, el término 'paciente' se utilizará para referirse a los lactantes o niños pequeños en el resto de este documento.

Patient is placed on a tray or sling which is attached to a weighing platform for the device to measure patient weight.

Beneficio clínico

Los resultados de la medición pueden ser utilizados por los profesionales para diagnosticar (y monitorear) problemas relacionados con el peso.

Indicaciones/contraindicaciones médicas previstas

Medición: peso corporal del sujeto. No se conocen contraindicaciones para la medición del peso corporal.

Perfil del paciente previsto

- (a) Edad: Sin restricciones (sujeto a las limitaciones de tamaño del dispositivo y capacidad máxima)
- (b) Peso: Sin restricciones dentro de la capacidad de peso del dispositivo
- (c) Condiciones del paciente: Requiere la medición del peso corporal. Puede colocarse en el dispositivo.

Perfil del usuario previsto

- (a) Tener al menos 20 años
- (b) Conocimientos mínimos:
 - Capaz de leer a nivel de escuela secundaria y de comprender los números arábigos (por ejemplo 1, 2, 3, 4...)
 - Conocimientos básicos de higiene
 - Capacitado en el uso del dispositivo
 - Leer el manual de instrucciones
- (c) Idioma
 - Capaz de leer el idioma del manual de instrucciones y las instrucciones en pantalla
- (d) Calificaciones
 - No se requieren certificaciones o cualificaciones especiales

Evaluación del riesgo residual

- (a) Todos los riesgos previsibles han sido evaluados y considerados aceptables. En términos generales, el riesgo más probable causado por un uso incorrecto del dispositivo es una medición menos precisa (o la incapacidad de utilizar el dispositivo para obtener una medición), lo cual no representa un riesgo físico inminente para el paciente o el usuario.
- (b) La relación beneficio-riesgo se considera aceptable. Las básculas para bebés son una opción importante para medir a los pacientes. Es poco probable que el uso del dispositivo cause daño al usuario o al paciente.

Manejo general

- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente bloqueadas y apretadas antes de utilizar el dispositivo.
- La precisión de la medición requiere que los pies, la espalda y la cabeza del sujeto estén alineados. Tenga en cuenta que la altura puede variar a lo largo del día.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice junto a equipos que puedan causar interferencias electromagnéticas u otros tipos de interferencias.

Instrucciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea este manual de usuario detenidamente. Contiene instrucciones importantes para la instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo.

El fabricante no será responsable de los daños causados por no seguir las siguientes instrucciones:

- El dispositivo tiene una vida útil esperada de 5 años cuando se maneja, se mantiene y se inspecciona periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Una instalación incorrecta anulará la garantía.
- Observe las temperaturas ambientales permitidas para el uso.

Limpieza

- La superficie del dispositivo debe limpiarse con toallitas a base de alcohol.

Mantenimiento

- Póngase en contacto con su distribuidor local de Charder para el mantenimiento y la calibración regulares; Se recomienda una revisión periódica de la precisión, cuya frecuencia dependerá del nivel de uso y del estado del dispositivo.

Garantía/Responsabilidad

- El período de garantía será de treinta y seis (36) meses, comenzando en la fecha de compra. Conserve su recibo como comprobante de compra.
- No se aceptará responsabilidad por daños causados por las siguientes razones: almacenamiento o uso inadecuado, instalación o puesta en servicio incorrecta por parte del propietario o terceros, desgaste natural, cambios o modificaciones, manejo incorrecto o negligente, interferencia química, electroquímica o eléctrica, a menos que el daño sea atribuible a la negligencia de Charder.
- Este dispositivo no contiene partes que el usuario pueda mantener. Todo el mantenimiento, las inspecciones técnicas y las reparaciones deben ser realizadas por un distribuidor autorizado de Charder, utilizando accesorios y piezas de repuesto originales de Charder. Charder no será responsable de los daños derivados del mantenimiento o uso inadecuado. Desmontar el dispositivo anulará la garantía.

Informe de Incidentes

- Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe ser informado al fabricante, al representante de la UE (si el dispositivo se utiliza en un estado miembro de la UE) y a la autoridad competente del estado miembro del usuario/paciente.

B. Directrices EMC y declaración del fabricante

Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas		
El producto está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.		
Prueba de emisión	Cumplimiento	Guía de ambiente electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	La báscula pesa personas utiliza energía RF solo para su función interna. Por tanto, sus emisiones RF son muy bajas y verosíblemente no causan ninguna interferencia en los aparatos electrónicos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	La báscula pesa personas es adecuado para utilizarse en todos los centros sanitarios u hospitalarios, conectados a la red de alimentación pública de baja tensión.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje /emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumplimiento	

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas			
El producto está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Conformidad IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Guía de ambiente electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire	±8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire	Los suelos deberían ser de madera, hormigón o cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa deberá ser de al menos el 30%
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC 61000-4-4	±2Kv suministro eléctrico	±2kV suministro eléctrico	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1kV línea(s) a línea(s) ±2kV línea(s) a tierra	±1kV línea(s) a línea(s) ±2kV línea(s) a tierra	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	0% UTpara0, 5 ciclo 0% UTpara 1 ciclo 70% UT(30% dip in (UT) para 25ciclo 0% UTpara 5 ciclo	0% Utpara 0,5 ciclo 0% UTpara 1 ciclo 70% UT(30% dip in UT) para 25 ciclo 0% UT para 5 ciclo	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital. Si el usuario necesita un funcionamiento continuo del instrumento, se recomienda alimentar el instrumento desde un grupo de continuidad o una batería.
Campo magnético de frecuencia industrial (50, 60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital.
NOTA UT es el voltaje de la corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El producto está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del producto deberá asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Guía de ambiente electromagnético
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz a 80 MHz	3 Vrms 150 KHz a 80 MHz	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del producto, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2,5 GHz Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético del sitio, deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia. Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF radiada IEC 61000-4-3	6 V en bandas ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz 80 % AM a 1 kHz 3 voltios por minuto De 80 MHz a 2,7 GHz	6 V en bandas ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz 80 % AM a 1 kHz 3 voltios por minuto De 80 MHz a 2,7 GHz	

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

- a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos de radio (celulares o inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar una inspección electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el producto supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable indicado anteriormente, se debe observar el producto para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que se necesiten medidas adicionales, como reorientar o reubicar el producto.
- b En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

**Distancias de separación recomendadas
entre aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles**

La báscula pesa personas está prevista para funcionar en un ambiente electromagnético donde están bajo control las interferencias irradiadas RF. El cliente o el operador del dispositivo pueden contribuir a prevenir las interferencias electromagnéticas, garantizando una distancia mínima entre los aparatos de comunicación móviles y portátiles de RF (transmisores) y el dispositivo, como se recomienda a continuación, en relación con la potencia de salida máxima de los aparatos de radiocomunicación.


Potencia de salida nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación a la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2.7 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para los transmisores con potencia nominal máxima de salida no indicada arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en Vatios (W), según el fabricante del transmisor. Notas: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de la frecuencia más alta. Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética está influenciada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.


IV. Instalación

A. Tallímetro accesorio


1. Retire la cubierta del soporte de sujeción.

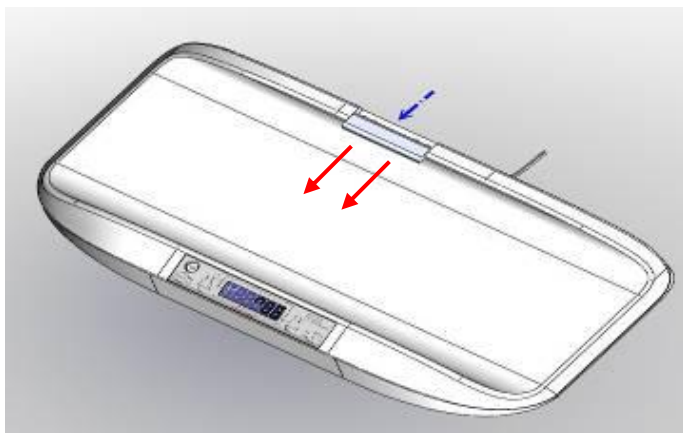

2. Fije el soporte al dispositivo con dos tornillos.

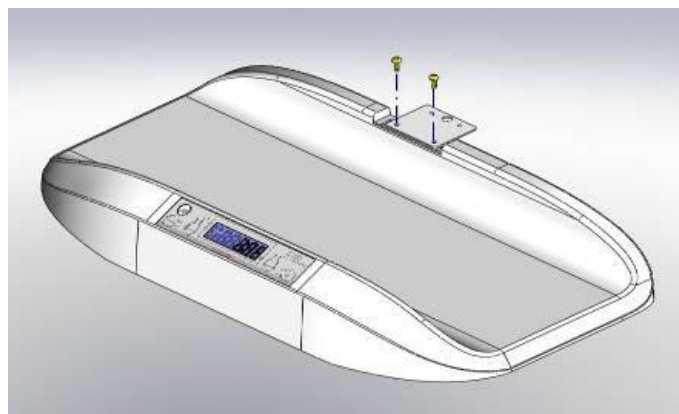



3. Coloque la varilla de altura en el soporte con cuidado hasta que escuche un clic.
(HM80D utilizado como ejemplo)

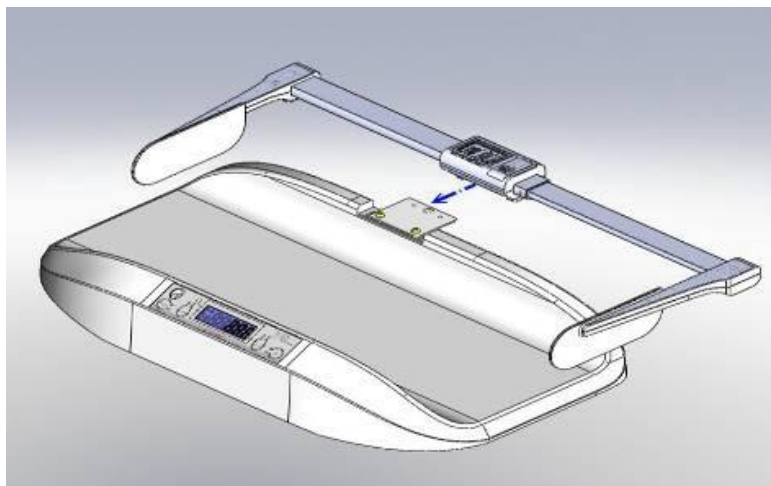

4. Instale la cubierta del soporte de sujeción.


(HM80D)

(HM80M)

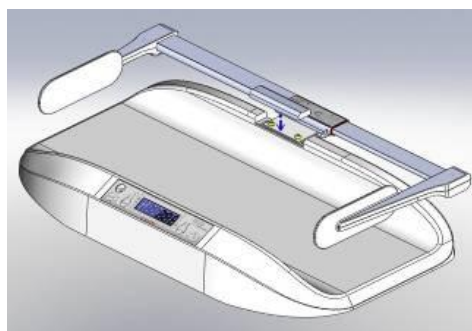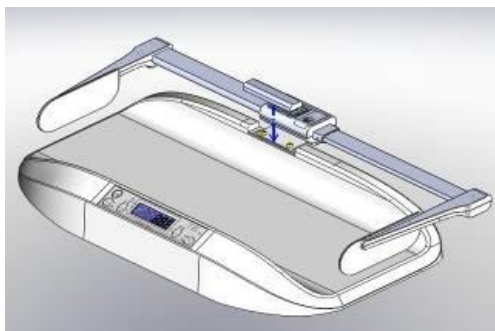

B. Inserción de pilas


Paso 1. Abra la tapa de las pilas y extraiga el compartimiento de las pilas. Inserte las pilas corrigiendo la polaridad.

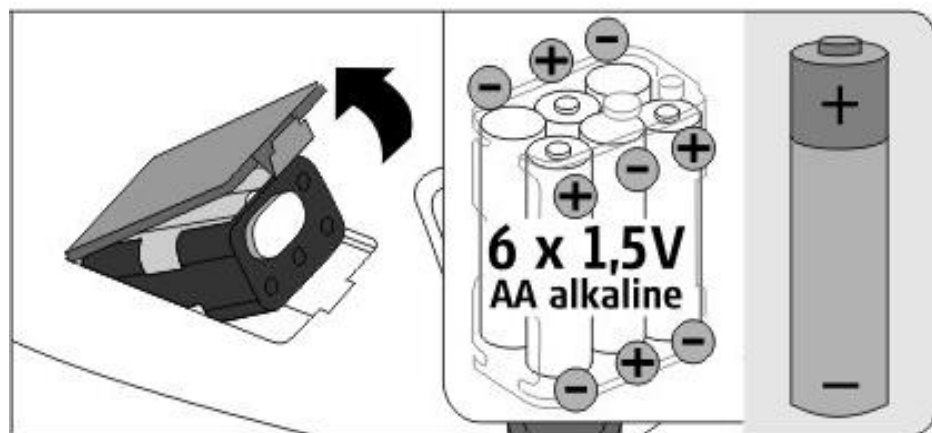

Si aparece un mensaje **LoBAt** en la pantalla LCD, reemplace las pilas o conecte el adaptador.

C. Uso del adaptador de CA

El dispositivo se puede alimentar con un adaptador de CA. Conecte el adaptador al dispositivo antes de enchufarlo a la red eléctrica.

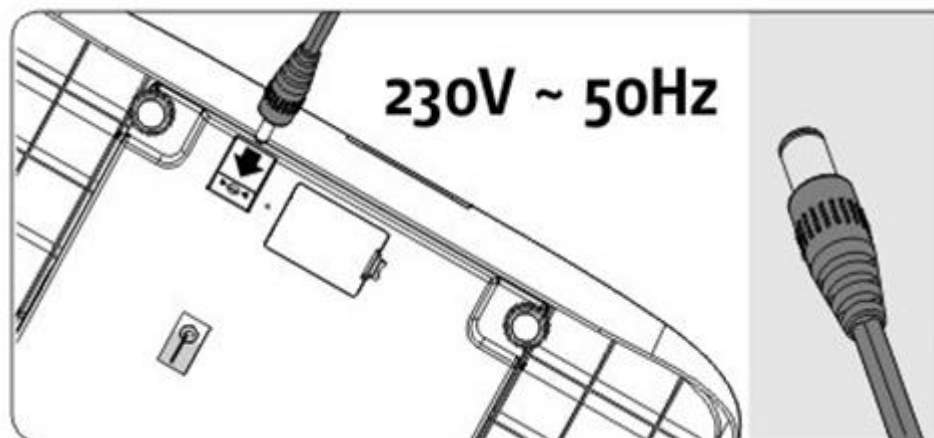

V. Indicadores y funciones de las teclas



Mostrar

- : Estable
- : Peso negativo
- +○+: Cero

Función clave

1. Hold/Milk Intake:
 - Pulse la tecla **[Hold/Milk Intake]** una vez para retener el peso. Para volver al modo de pesaje normal, pulse la tecla **[Hold/Milk Intake]** de nuevo.
 - Mantenga presionada la tecla **[Hold/Milk Intake]** durante 3 segundos para habilitar la función de toma de leche.
2. Memory/Recall:
 - Presione la tecla **[Memoria/Recuperar]** para recuperar el peso almacenado.
 - Mantenga presionada la tecla **[Memoria/Recuperar]** durante 3 segundos para almacenar el peso actual.
3. O/T (Cero/Tara):
 - Presione la tecla **[O/T]** para poner a cero la escala ($\pm 2\%$ de la capacidad total).
 - Presione la tecla **[O/T]** para tarar el peso en el dispositivo.
4.  (Encendido/Apagado):
 - Presione  para encender o apagar el dispositivo.

VI. Uso del dispositivo

A. Funcionamiento básico

Encienda el dispositivo con la tecla . El dispositivo realizará automáticamente una autocalibración y mostrará la versión del software.

Una vez que aparezca "0,00 kg" en el indicador, el dispositivo estará listo para la medición.

Nota : Si no aparece "0,00 kg" en el indicador, presione la tecla **[ZERO]** para poner a cero el dispositivo. Esta función se puede utilizar para pesos dentro del $\pm 2 \%$ de la capacidad total .

Coloque suavemente al bebé sobre la bandeja. Presione la tecla **[Hold/Milk Intake]**. El símbolo HOLD aparecerá en el indicador. Una vez que el peso se haya estabilizado, el símbolo HOLD desaparecerá y el indicador mostrará el peso del bebé.

Nota: Si el peso del bebé excede la capacidad del dispositivo (incluida la tara), el indicador mostrará el mensaje "Err" debido a la sobrecarga.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para desactivar la función Hold.

Nota: La función de retención se puede activar antes o después de colocar al bebé en la bandeja. Sin embargo, si el bebé no puede quedarse quieto, recomendamos activar la función de retención después de colocarlo en la bandeja.

B. Rellamada

1. Después de medir el peso del bebé, mantenga presionada la tecla **[Memoria/Recuperar]** durante 3 segundos para almacenar el peso.
2. Presione la tecla **[Memoria/Recuperar]** para recuperar el peso almacenado.

C. Ingesta de leche

La función de ingesta de leche facilita el registro de la ingesta de leche del bebé. Comience midiendo el peso del bebé antes de la ingesta de leche.

1. Pese al bebé antes de alimentarlo.

	Mostrar
Encienda el dispositivo.	RecallMilk Intake HoldNet 0.00 kg
Coloque al bebé en la bandeja (se utilizaron 5 kg como ejemplo)	RecallMilk Intake HoldNet 5.000 kg
Presione la tecla Hold/Milk Intake	RecallMilk Intake HoldNet 5.000 kg Aparecerá un triángulo junto a "HOLD"
Mantenga pulsado Memory/Recall durante 3 segundos para almacenar el peso del bebé.	RecallMilk Intake HoldNet 5.000 kg La pantalla parpadea tres veces y almacena el peso del bebé

2. Alimentar al bebé.

3. Pese al bebé después de alimentarlo.

	Mostrar
Encienda el dispositivo.	RecallMilk Intake HoldNet 0.00kg
Coloque al bebé en una bandeja (se utiliza como ejemplo un peso de 5,2 kg después de alimentarlo)	RecallMilk Intake HoldNet 5.200kg
Mantenga pulsado Hold/Milk Intake durante 3 segundos. La ingesta de leche se mostrará en la pantalla (0,2 kg en el ejemplo)	RecallMilk Intake HoldNet 0.200kg Aparecerá un triángulo junto a "MILK INTAKE"
Presione la tecla para volver al modo normal.	RecallMilk Intake HoldNet 5.200kg

D. Imprimir

Si la impresora térmica está conectada al indicador a través del cable de transferencia, se pueden imprimir los resultados.




VII. Conexión inalámbrica

Si el dispositivo tiene instalado el módulo inalámbrico, el indicador puede transmitir resultados de medición de forma inalámbrica.

A. Activar WiFi

1. Encienda la báscula. Mantenga presionada la tecla **[O/T]** durante 3 segundos para ingresar a la configuración.
2. Pulse la tecla **[Hold/Milk Intake]** varias veces hasta que **WiFi** aparezca el estado (ON/OFF). Si el estado es OFF, pulse la tecla **[O/T]** para entrar, pulse la tecla **[Hold/Milk Intake]** para cambiar a ON y pulse la tecla **[O/T]** para confirmar la configuración.
3. Presione la tecla **[Hold/Milk Intake]** varias veces hasta que **End** aparezca y presione la tecla **[O/T]** para guardar y regresar al modo normal.

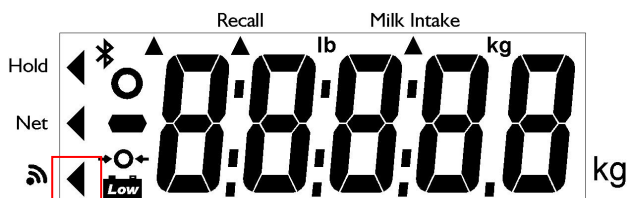

- *** Sin señal triangular: la alimentación inalámbrica de la báscula está apagada ***
- *** El signo triangular aparece continuamente: conectando...***
- *** El signo triangular parpadea: conectado ***

VIII. Configuración del dispositivo

Con el dispositivo encendido, mantenga pulsada la tecla **[O/T]** hasta que en la pantalla aparezca " SET UP ", seguido de "A_OFF"(primera opción en el menú de configuración).

En la configuración del dispositivo:

[Hold/Milk Intake] para alternar la opción del menú

[O/T] para confirmar la selección / ingresar al submenú

A_OFF

Apagado automático: Indica al dispositivo que se apague automáticamente después de un cierto período de tiempo.

Opciones de apagado automático: 60 segundos / 120 segundos / 240 segundos / 300 segundos / apagado

Pulse la tecla **[Hold/Milk Intake]** para seleccionar el tiempo objetivo. Después de la selección, pulse **[O/T]**. El indicador volverá a "A.OFF".

DATE

Establecer fecha del dispositivo: El formato/orden es YYYY/MM/DD/HH:MM. (24 horas)

2013 → 0308 → 12:00
Año Mes Día Hora Minuto

[Retención/Ingesta de leche] : seleccionar el siguiente dígito

[O/T] : Aumentar



: Introducir/confirmar entrada

SET ID


Establecer ID de escala : Esta función la utiliza el técnico de servicio y el usuario normalmente no necesita cambiar la configuración.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para alternar entre no/sí, y **[O/T]** para confirmar la selección.




Bluetooth (opcional): Si el dispositivo tiene un módulo Bluetooth instalado, se puede activar o desactivar la función Bluetooth.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para alternar entre encendido/apagado, y **[O/T]** para confirmar la selección.

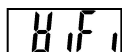


Wi-Fi (opcional): Si el dispositivo tiene un módulo Wi-Fi instalado, se puede activar o desactivar la función Wi-Fi.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para alternar entre encendido/apagado, y **[O/T]** para confirmar la selección.

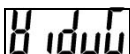

Probar el problema de conexión Wi-Fi (opcional) : Si el dispositivo tiene un módulo Wi-Fi instalado, esta función debe ser utilizada por un técnico de servicio y el usuario normalmente no necesita cambiar la configuración.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para alternar entre no/sí, y **[O/T]** para confirmar la selección.

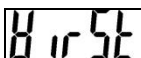

Configuración de la aplicación Wi-Fi (opcional) : si el dispositivo tiene un módulo Wi-Fi instalado, esta función debe ser utilizada por un técnico de servicio y el usuario normalmente no necesita cambiar la configuración.

Presione **[Hold/Milk Intake]** para alternar entre no/sí y **[O/T]** para confirmar la selección.

Después de completar los ajustes, presione la tecla **[Hold/Milk Intake]** . Aparecerá "End". Presione la tecla **[O/T]** para aplicar los cambios y finalizar los ajustes.

IX. Solución de problemas

Antes de contactar a su distribuidor local de Charder para solicitar servicio de reparación, le recomendamos que tenga en cuenta los siguientes procedimientos de solución de problemas:

Autoinspección

1. El dispositivo no se enciende

- Si la pila se agota, reemplácelas con pilas nuevas.
- Si no se utilizan pilas, compruebe que el adaptador de corriente esté enchufado correctamente al dispositivo. Compruebe que el adaptador de corriente esté enchufado correctamente a la red eléctrica.

2. Indicador que muestra "0000" ZERO SPAN fuera de rango

- Interferencias debidas a factores como perturbaciones de RF o vibraciones del suelo. Reubique el dispositivo en un lugar sin interferencias y vuelva a intentarlo
- Plataforma inestable. Reubica el dispositivo en una ubicación estable y vuelve a intentarlo.
- Objetos externos que interfieren con la plataforma de medición. Limpie la plataforma de objetos y vuelva a intentarlo.
- Es posible que el dispositivo no funcione correctamente en superficies blandas, como alfombras o césped. Reubique el dispositivo en un lugar con un piso sólido y estable.
- Si los pasos anteriores no pueden resolver el problema, es posible que sea necesaria una recalibración para corregir la precisión del pesaje.

Se requiere el apoyo del distribuidor

Si ocurren los siguientes errores, le recomendamos que se comunique con su distribuidor local de Charder para obtener servicios de reparación o reemplazo:

1. El dispositivo no se enciende

- Tecla de encendido/apagado defectuosa
- Cables rotos o dañados que provocan cortocircuito o conexión defectuosa
- Fusible de seguridad fundido
- Adaptador defectuoso

2. Daños en el indicador

- Los posibles defectos de hardware incluyen: brillo desigual en la pantalla LCD, texto borroso, pantalla de arco iris manchada, visualización decimal incorrecta
- No se pueden guardar ni leer datos
- El indicador muestra "ERRL" después de encender el dispositivo
- Las teclas no responden
- Mal funcionamiento del timbre

Mensajes de error

Mensaje de error	Causa	Acción
Lo	Advertencia de batería baja El voltaje de la batería es demasiado bajo para que el dispositivo funcione	Reemplace las pilas o conecte el adaptador
Err	Sobrecarga La carga total excede la capacidad máxima del dispositivo	Reducir el peso en la plataforma de medición y volver a intentarlo
00000	Recuento de cero sobre rango de calibración de cero +10 % mientras está encendido	Se requiere recalibración. Póngase en contacto con el distribuidor.
00000	Recuento cero en el rango de calibración cero -10 % mientras está encendido	Se requiere recalibración. Póngase en contacto con el distribuidor.
Err.E	Error de programa Fallo en el software del dispositivo	El error suele deberse a una célula de carga defectuosa o a un cableado defectuoso. Póngase en contacto con el distribuidor.

X. Especificaciones del producto

A. Especificaciones del producto

Modelo		MS5900		
Medición de peso	Capacidad	(15 kg) 0-6 kg x 2g 6-15 kg x 5g	(15 kg) 0-15 kg x 5g	(20 kg) 0-10 kg x 5g 10-20 kg x 10g
	Exactitud	±1,5e		
	OIML	Clase III		
	Pantalla LCD	Pantalla LCD de 1,0 pulgadas (5 dígitos)		
Dimensiones	En general	670(W) x 330(D) x 125(H) mm		
	Bandeja	630(W) x 250(D) x 70(H) mm		
Peso del dispositivo		4,1 kg		
Funciones clave		On/Off, Zero/Tare, Memory/Recall, Hold/Milk Intake		
Transmisión de datos		USB, módulo inalámbrico (opcional) NOTA : El dispositivo debe ser conectado a la red únicamente por distribuidores calificados.		
Fuente de alimentación		6 pilas AA / Adaptador de corriente		
Entorno de operación		0°C ~ +40°C 15% ~ 85% HR 700 hPa ~ 1060 hPa		
Accesorios estándar		Manual de usuario x1 Adaptador de corriente x1		
Accesorios opcionales		Medidor de altura, impresora térmica Bolsa de transporte		

B. Información sobre el adaptador de corriente



Advertencia

El dispositivo solo es compatible con los adaptadores de corriente especificados a continuación.

VOLTAJE DE AMPERAJE	DIBUJO NÚM.	NÚMERO DE TIPO / NÚMERO DE MODELO APROVADO POR LA CE.	TIPO	Adaptador enchufe
12V 1A	CD-AD-00043	UES12LCP-120100SPA	US	 180 - degree
	CD-AD-00043	UES12LCP-120100SPA	EU	
	CD-AD-00043	UES12LCP-120100SPA	UK	
	CD-AD-00043	UES12LCP-120100SPA	AU	

XI. Declaración de conformidad del Fabricante

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas europeas armonizadas, siguiendo las disposiciones de las directivas mencionadas a continuación:

	Reglamento (UE) 2017/745 sobre Productos Sanitarios
	Directiva 2014/31/EU sobre instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva Delegada (EU) 2015/863

Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación


(aplicable si el dispositivo dispone de función inalámbrica)

(La Declaración de conformidad completa está disponible en el sitio web del fabricante)

Representante autorizado de la UE:



Manufactured by:

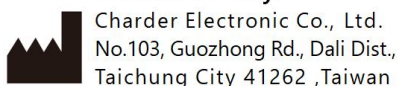

CD-IN-02048 REV002 07/2026