



嬰兒秤

MS21NEOV

使用說明書



使用產品前請仔細閱讀說明書，妥當保管以供隨時查閱

標籤圖示說明(請對照產品本身的標籤)

圖示	說明
	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件
	勿與一般家用電子設備一起丟棄 (請洽詢所在地的電子設備回收單位處理)
	廢電池請回收
	製造商的名稱地址
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材
	B 類人體接觸產品
REF	產品型錄編號
LOT	產品生產批次
SN	產品序號
#	產品型號
UDI	UDI 單一識別碼 (01) GTIN (11) 生產日期 (21) 序號
e	顯示值的差異，用來定義和校驗產品
CE	產品宣告符合相關歐盟指令
CON.	紀錄保護模式中與度量相關特性 (例: 重力值) 的參數修改次數
	產品已取得台灣國家通訊傳播委員會 (NCC) 證書

	產品符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範
	產品符合相關英國指令
	產品使用直流電供電，接頭極性採「內正外負」設計。請務必使用符合此極性定義的原廠變壓器，以免造成電路損壞
警告 本產品非醫療器材僅作為重量測量用途；使用前應詳閱使用說明書	

如有差異，以產品本身的圖示為準

版權宣告

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約保護。未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或產生費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

目錄頁

安全須知	5
產品規格	13
標準配件	15
面板	16
按鍵功能	17
LCD 顯示幕說明	18
LCD 標示說明	18
時間設定說明	19
功能使用說明	19
功能設定說明	23
電源供應	25
電池更換說明	30
錯誤訊息	33
符合性宣告頁	35

安全須知

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品時遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用及日常維護方式等重要資訊。

產品用途

此產品應由專業人士操作，在原廠所制定的規格內，用來量測嬰幼兒的體重。

預期受測者輪廓

- (1) 年齡: 無限制 (受測者應受限於產品規格內的體重與身長)
- (2) 體重: 無限制 (受測者應受限於產品規格內的體重)
- (3) 受測者狀態: 可平躺在產品托盤尺寸內的體型

預期操作者輪廓

- (1) 年齡: 20 歲以上
- (2) 最少應具備的能力: 可以閱讀中文字並識別數字
- (3) 語言能力: 可閱讀使用說明書螢幕上所出現的中英文標示
- (4) 證照需求: 無特殊證照需求

操作注意事項

- 產品應安裝於平穩、平坦、堅硬、防滑的桌面
- 操作產品前，請確保所有零件已確實鎖緊固定
- 操作產品時，應量測單一位受測者

安全事項

- 請小心保管電池，避免兒童誤食。若不小心吞下，請立即就醫
- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照電子產品相關安全規範操作產品
- 請確保變壓器電壓符合市電電壓
- 產品應在室內使用

- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

環境安全

- 電池應依照當地電器回收規範處理，請勿燃燒電池。

產品清潔

- 產品表面建議使用柔軟無絨布搭配 70%-75%酒精進行清潔。
- 請勿使用大量的清水清洗，以免造成內部電子零件的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或清潔液清潔產品。
- 清潔前，請拔除電源線。

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業，不在保固範圍內

產品維護

- 本產品不需每日保養。然而我們建議定期檢視產品的精準度；檢驗頻率依照使用頻度而異。若準確度有問題，請聯繫當地經銷商。

報廢回收處理

- 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。



警告

- 千萬不要擅自拆解或改裝產品，避免造成觸電或其它傷害，或影響量測準確

度。

- 請避免讓產品曝曬在陽光下，或太接近熱源。環境過熱可能會傷害產品的內部電子零件。
- 請務必使用原廠變壓器
- 請勿用濕手觸摸變壓器
- 請勿摺疊變壓器的線材，避免尖銳處破裂
- 若產品變壓器接在延長線上，請勿過載延長線
- 請勿拉扯變壓器的線
- 設備請遠離液體
- 請勿用猛拉電線的方式移除插頭
- 使用正確接線的 (100-240VAC) 插座，並且不要使用多孔延長線。
- 切勿拆卸或更改設備，否則可能會導致觸電或受傷，並且會對測量精度產生不良影響。
- 請勿讓產品被太陽光直射或放置於接近熱源處。高溫環境將導致內部電子零件受損。

意外事件回報

與設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商、歐盟代表 (如果設備在歐盟成員國使用) 和用戶/主體成員國的主管當局。

電磁標準與製造商宣告

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions		
The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in such an environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment-guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The product uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class A	The product is suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations /flicker emissions IEC 61000-3-3	Compliance	

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity

The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Electrostatic discharge(ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2kV for power supply lines	± 2kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1kV line(s) to line(s) ± 2kV line(s) to earth	± 1kV line(s) to line(s) ± 2kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage Dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT for 0,5 cycle 0% UT for 1 cycle 70% UT(30% dip in UT) for 25cycles 0% UT for 5 s	0% UT for 0,5 cycle 0% UT for 1 cycle 70% UT(30% dip in UT) for 25cycles 0% UT for 5 s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the product requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the product be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency(50, 60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	The product power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity

The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the product should assure that is used in such and environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz to 80 MHz 6 V in ISM bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	3 Vrms 150 KHz to 80 MHz 6 V in ISM bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the product including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2,7GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz to 2,7 GHz	3 V/m 80MHz to 2,7 GHz	

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE2

These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the product.
- b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

**Recommended separation distance between
portable and mobile RF communications equipment and the product**

The product is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the product can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the product as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz to 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

無線傳輸警語（若設備有安裝無線模組）

低功率射頻器材警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品規格




型號	MS21NEOV (DP3710)
量程	15kg
解析度	2g <6kg>5g
精準度	$\pm 3g < 6kg > \pm 7.5g$
量測單位	公斤
LCD 顯示幕尺寸	一英吋高與五位半數字顯示
產品尺寸	560 x 290 mm (托盤)
操作按鍵	ON/OFF, ZERO, PRINT, BMI, HOLD, PRETARE, TARE , CLEAR, ENTER, 0~9 , M1-5
電源供應	➤ 6-AA 電池. ➤ 充電式電池包 (選購). ➤ 12V 醫療級變壓器
標準配備	秤盤 x 1, 中文使用說明書 x 1, USB 傳輸線 x 1 , 12V 2A 變壓器 x 1
選配	機械式嬰兒身長尺 HM80M
	數位式嬰兒身長尺 HM80D
	無線熱感印表機 TP2110
操作環境	$+0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 15% RH ~ 85% RH 700 hPa ~1060 hPa
產品重量	4.8 kg



產品只能搭配指定原廠變壓器使用

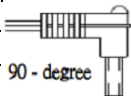
變壓器安培 與電壓	圖號	證書號碼	插頭 型式	插頭樣式
12V 2A	CD-AD-00041	UES24LCP-120200SPA	US	
	CD-AD-00041	UES24LCP-120200SPA	EU	
	CD-AD-00041	UES24LCP-120200SPA	UK	
	CD-AD-00041	UES24LCP-120200SPA	AU	

標準配件

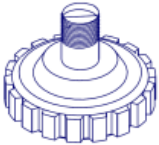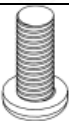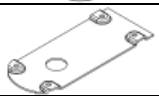No.	配件	項目	產品圖號	數量
1		調整腳	SW-1111A	1
2		圓頭螺絲	M4*0.7*8	4
3		支撐桿底座螺絲	M4*0.7*15	3
4		支撐桿底座	SS-3771	1
5		中文說明書	IN-1429	1
6		USB 傳輸線	WR-4001	1
7		12V 2A 變壓器		1


面板

不具有無線功能面板

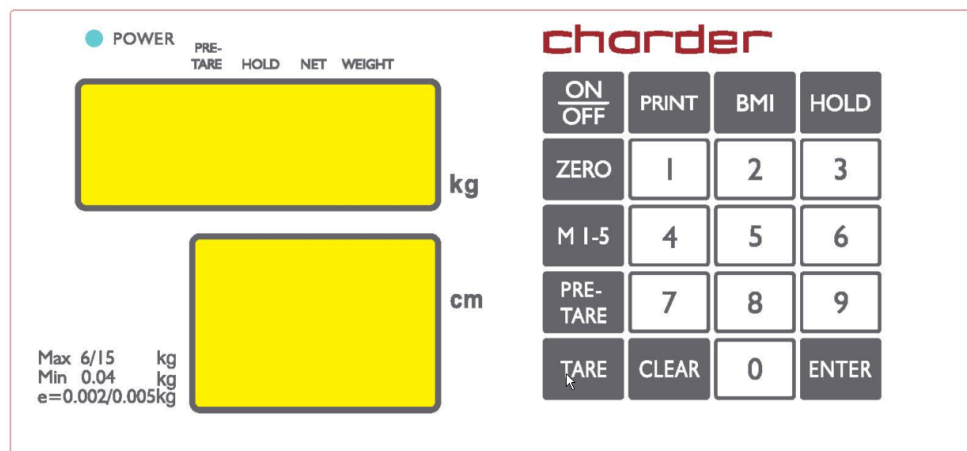

具有無線功能面板 (選配)


無線傳輸符號

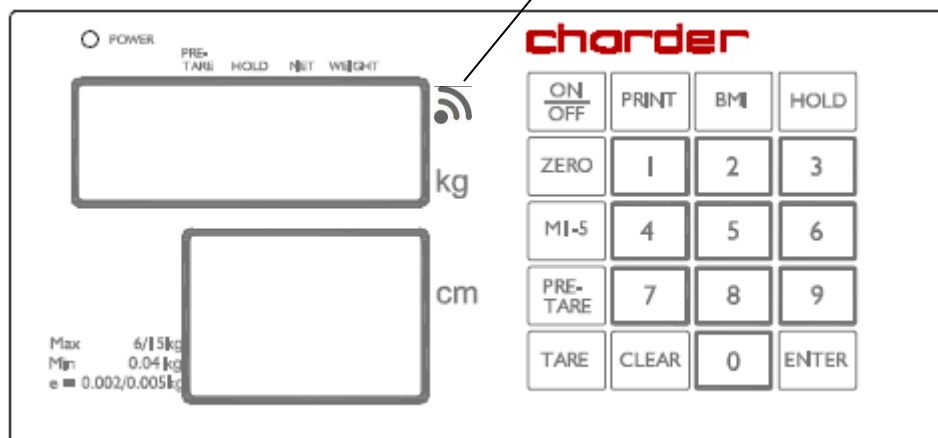

按鍵功能

Key	Description
ON/OFF	[開機/關機] 按下此鍵可開關機
PRINT	[列印] 按下此鍵可列印輸出
BMI	[BMI] 按下此鍵可開啟 BMI 功能
HOLD	[重量鎖定] 按下此鍵開啟重量鎖定功能
ZERO	[歸零按鍵] 按下此鍵可歸零，建議使用者每次開機後待顯示 0.0kg 後，再按一次歸零再上秤 (全量程的 $\pm 2\%$)
M1-5	[五組記憶] 五組記憶功能，可儲存 或 呼叫出五組扣重量記憶
PRE-TARE	[預扣重] 按下後可進入預扣重功能，按數字鍵輸入預扣重重量後按 [ENTER] 決定鍵進行扣重
TARE	[扣重] 按下後可扣除已在秤上的重量
CLEAR	[清除] 清除輸入錯誤數字
ENTER	[確認] 輸入數字後可按確認鍵作功能確認動作
0-9	輸入數字

LCD 顯示幕說明

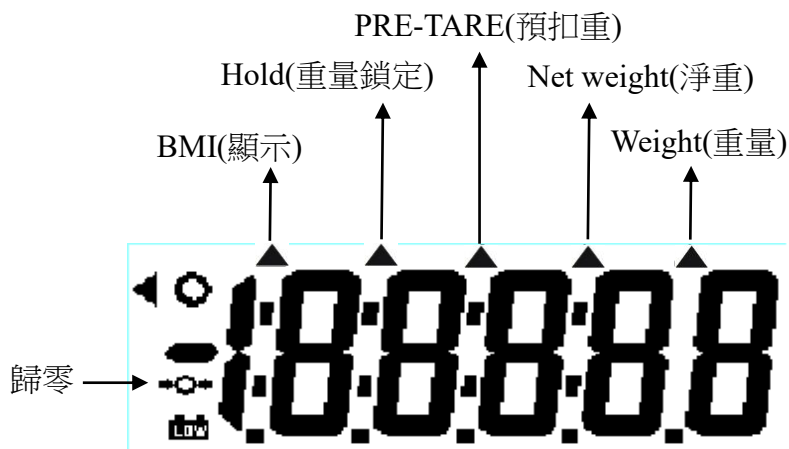


LCD 標示說明

[→0←]	歸零顯示：如果開機後磅秤未顯示零 [→0←]，請按下 [→0←] 按鍵讓磅秤歸零，如此量測才會準確。
[o]	穩定顯示：當重量穩定後，穩定顯示出現。當重量持續變動，穩定顯示消失。
BMI ▲	表示目前正在 BMI 功能模式中
HOLD ▲	表示目前正在重量鎖定模式中
PRE-TARE ▲	表示目前正在預扣重模式中
NET ▲	表示目前淨重
WEIGHT ▲	表示目前在測重模式中

時間設定說明

長按 HOLD 鍵 3 秒以進入時間設定模式, 從上排開始, 閃爍的數字代表可變更。按下 HOLD 鍵確認修改並進行下一個動作

EX: To input Dec 25, 2008, 8:00am.

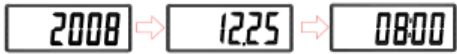	使用 0~9 數字鍵輸入年份, 按下 HOLD 鍵進行下一修改
	使用數字鍵輸入日期 Ex: 12/25 便輸入 "12.25" 按下 HOLD 鍵進行下一修改
	使用數字鍵輸入時間
	LCD 顯示模式: 格式: YYYY→MM.DD→TT:SS 使用 HOLD 鍵回到一般秤重模式

功能使用說明

- ◆ 使用  開機。
- ◆ 首先磅秤顯示程式版本，接下來顯示歸零符號 $\rightarrow 0 \leftarrow$ 並顯示 "0.0kg"。
- ◆ 使用者上秤/可將嬰兒放上秤台

注意: 如果螢幕沒有顯示 "0.000 kg", 請按  鍵將磅秤歸零,

鍵可在任何時候使用

- ◆ 當磅秤穩定後, 螢幕會出現 (o) 符號

注意:

如使用者重量超過磅秤上限, 則出現 “Err” 字樣表示超重, 此時磅秤無法量測, 必需減少重量至磅秤可量測範圍, 此時會回復正常顯示。

TARE[扣重]

扣重功能必需事先準備扣重物或相等重量在使用者上秤前先扣掉重量, 以便使用者上秤後直接得到淨重。

例如:

- ◆ 使用者上秤前需放一塊軟墊在上面方便使用者走上, 此時此塊軟墊放上去後, 磅秤會顯示使用者的重量, 按一下[TARE]鈕, 此時磅秤會重新顯示“ 0.0kg”, 此時表示已經扣除上面軟墊的重量, 這時使用者站上去就可以得到使用者本身的淨重量。

HOLD[重量鎖定]

當使用者上秤後, 重量穩定按下[HOLD]鈕將開始鎖定重量, 待磅秤穩定後將顯示鎖定後的重量, 此時使用者下秤重量仍為鎖定狀態, 再按一次[HOLD]功能即解除。

身體質量指數[BMI]

1. 兒童和青少年的BMI是根據他們的年齡和性別來計算的, 通常稱為以年齡為準的BMI指數 (BMI-for-age)
2. 身體質量指數(Body Mass Index, BMI)對於兒童和青少年來說並不是一個主要的健康依據。如要測定兒童及青少年是否過重, 請向專業的醫護人員諮詢。
3. 以年齡為準的BMI指數, 百分點是最常用於判斷而同體型和成長特

點的指標。

BMI的計算方式:

BMI(Body Mass Index)= 體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)

Body Mass Index 身體質量指數 = 體重(公斤) / 身高 ² (公尺 ²) 人體健康最理想的數值被世界衛生組織認定為：22	
分 級	百分點範圍
體重過輕	第 5 個百分點以下
正常範圍	第 5 個百分點至第 85 個百分點 (不含第 85 點)
超 重	第 85 個百分點至第 95 個百分點 (不含第 95 點)
肥 胖	等於或高於第 95 個百分點

※ 如欲取得更多資訊，請上世界健康組織<http://www.who.int/en/>查詢。

BMI功能操作

1. 磅秤開機。
2. 使用者上秤。
3. 待重量穩定按BMI鍵進入BMI模式。
4. 此時可輸入身高。
5. 按數字鍵輸入使用者身高。
6. 按下[ENTER]鍵確認輸入的資料無誤。
7. 此時顯示幕顯示使用者的BMI,重量與身高。
8. 再按一次[BMI]鍵跳出BMI模式並回到正常秤重模式。

PRE-TARE[預扣重]與M1-M5[五組記憶]

預扣重功能可內存五組預扣重量，例如五組不同輪椅重，當需要取得使用者淨重時可直接叫出五組內存重量作預扣重。

儲存五組預扣重量

1. 磅秤開機。
2. 將預扣重物放上秤台，例如輪椅...。
3. 待重量穩定後按[M1-5]按鍵,接著顯示 “ ni ” 字樣。
4. 按下1到5其中一個數字代表你將存入的組別。
5. 此時該組別數字閃爍，再按一次該組別數字作為確認存入。

*如操作中欲取消存入重量，按下[**CLEAR**]鍵回到正常秤重模式。

呼叫內存五組預扣重量

1. 磅秤開機。
2. 待重量穩定顯示 “0.0kg” 。
3. 按[PRE-TARE]鍵不放直到出現 “ ni ” 字樣。
4. 按下數字鍵1到5，呼叫五組內存1到5組其中一組預扣重量。
5. 按下[**ENTER**]以確認預扣重量。
6. 顯示幕此時將顯示呼叫出來後的預扣重，PRE-TARE標示亮起。
7. 將欲秤重的人與輪椅一起推上秤，此時秤已預扣重量並取得使用者的淨重。
8. 回到正常秤重模式則按一下PRE-TARE鍵，當標示消失則表示目前已回到正常秤重模式。

PRE-TARE[預扣重]

1. 磅秤開機。
2. 按下[PRE-TARE]鍵
3. 輸入預扣重量

4. 按下[ENTER]鍵確認

5. 此時顯示預扣重量

功能設定說明

將磅秤開機, 接著長按[ZERO]3 秒。螢幕顯示" SETUP" → " A.OFF"

自動關機設定

使用者可以設定自動關機時間

120 秒/180 秒/240 秒/300 秒/關閉

蜂鳴器設定

使用者可以選擇將蜂鳴器打開或關閉

Buzzer: On/Off

無線設定

使用者可以選擇將無線功能打開或關閉

Bluetooth: On/Off

重量穩定設定

使用者可選擇磅秤是否自動解除重量鎖定

Hold5: On/Off

語言設定


使用者可選擇語言: 英文/義大利文/波蘭文

Language: English/Italian/Polish

字型設定

使用者可選擇字型

Font: Normal/Double

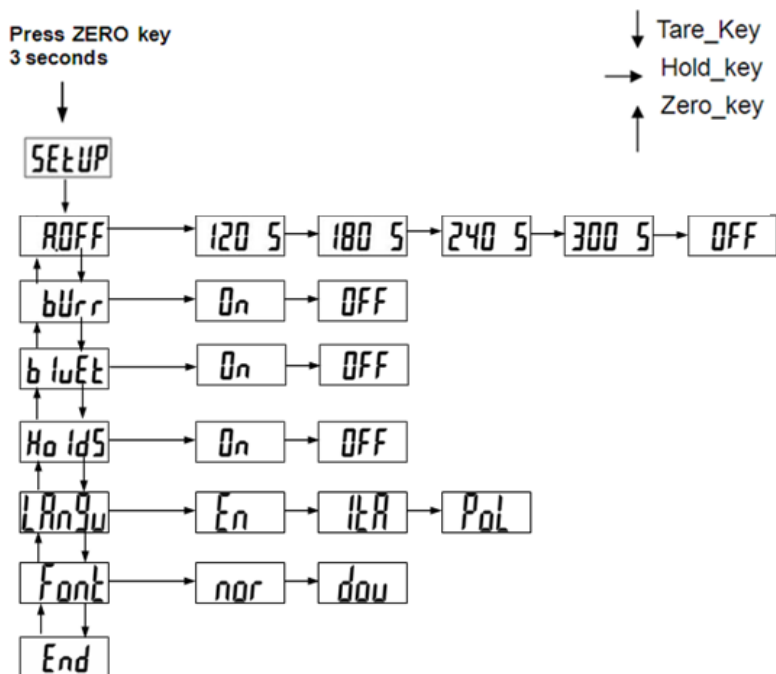


*用 TARE 鍵確認設定。例：如果想選擇 240 秒時為自動關機時間則在螢幕出現 **240S** 時使用 TARE 鍵確認。

** 完成設定後，使用 TARE 鍵按到螢幕出現 **End**，按下 HOLD 鍵確認，回到一般秤重模式。

***注意：除了自動關機時間及蜂鳴器，請勿修改其他內部設定。

電源供應

當顯示幕顯示 **Lo** 時，代表電池電量不足，請插上原廠提供變壓器或是更換新電池作為電源供應。

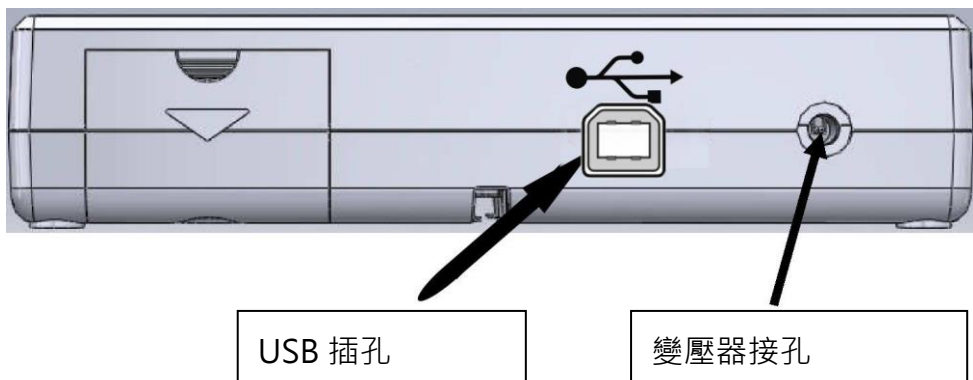


注意:


1. 使用變壓器時，變壓器接頭請先接上磅秤，再接電源。
2. 如欲拔除變壓器，請先拔除變壓器的電源，再拔除磅秤端的接頭

組裝 MS21NEOV


鎖上支撐管螺絲

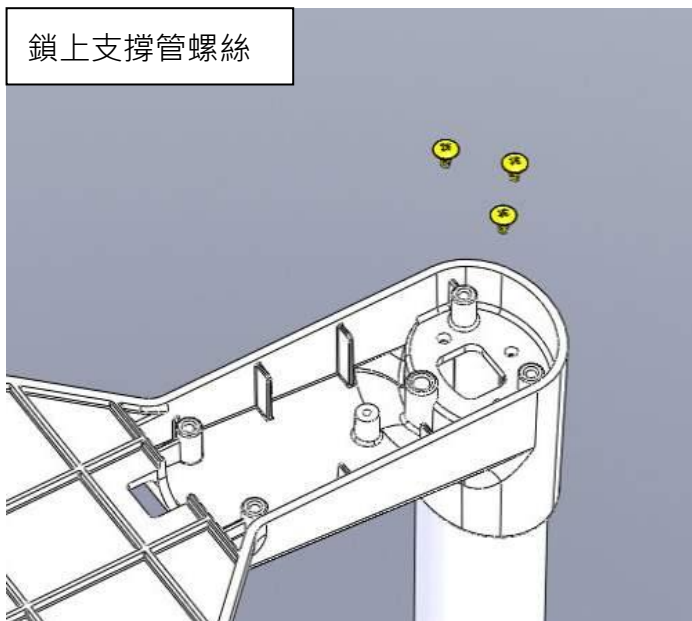

鎖上下蓋螺絲

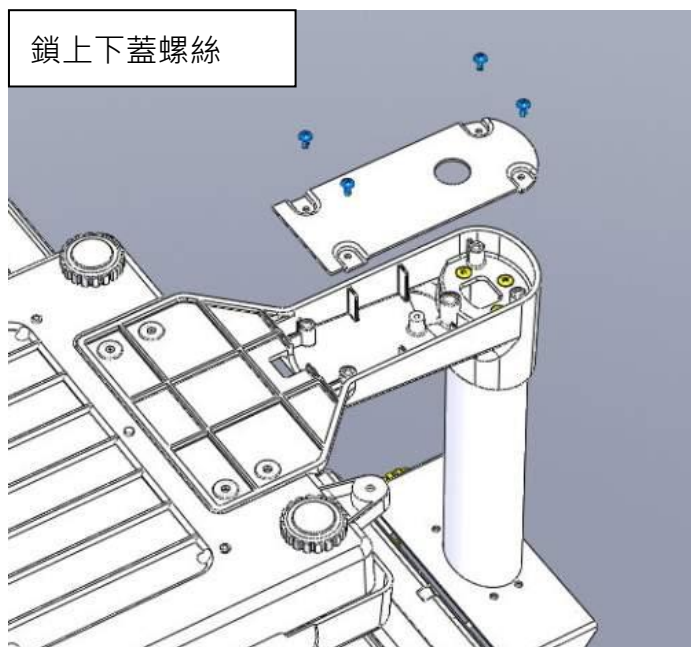


鎖上支撐管調整腳

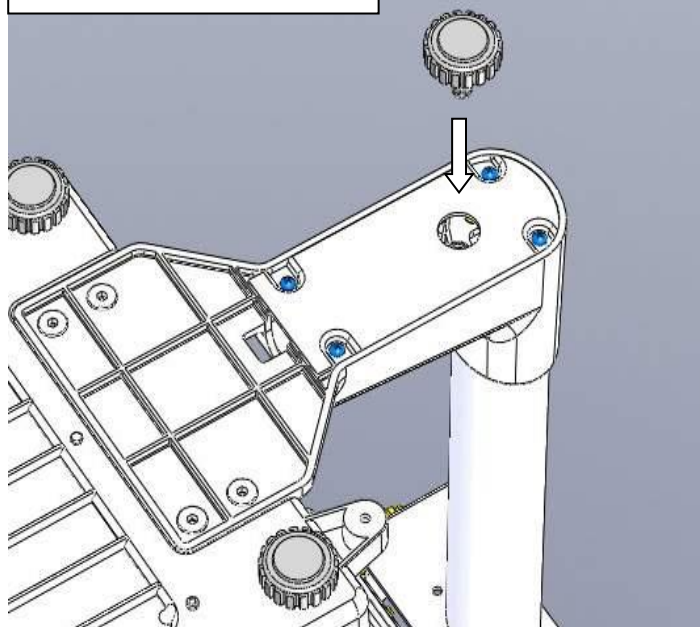


組裝秤盤



秤盤向前滑入

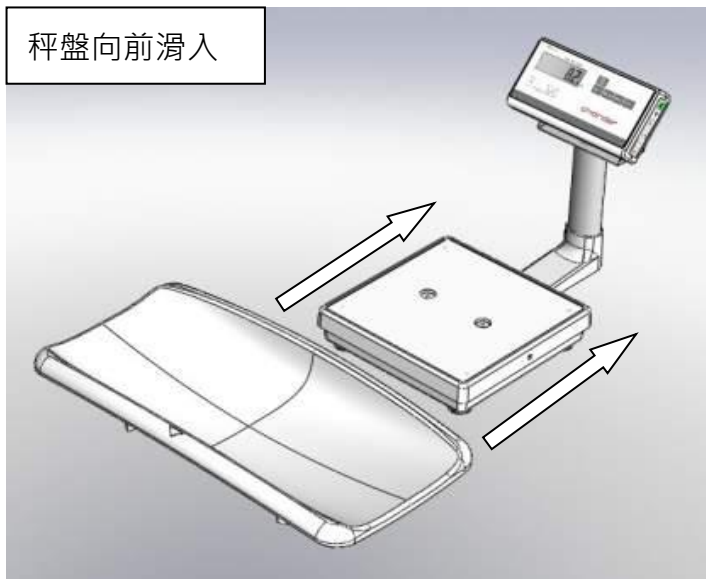

依上蓋滑槽滑入

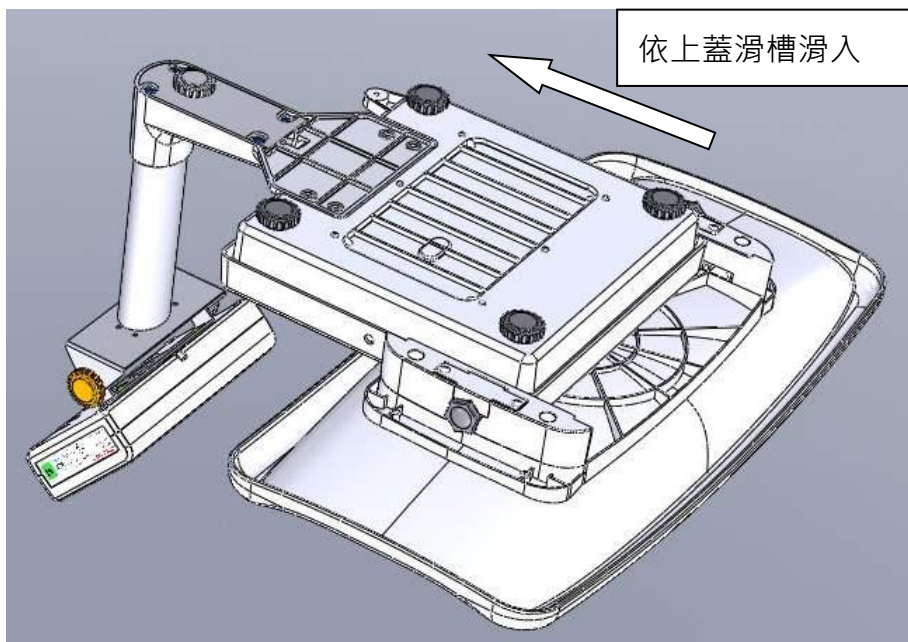


鎖緊兩邊調整鈕

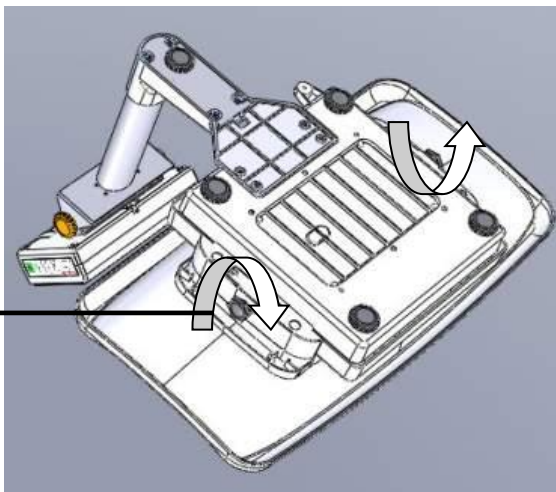
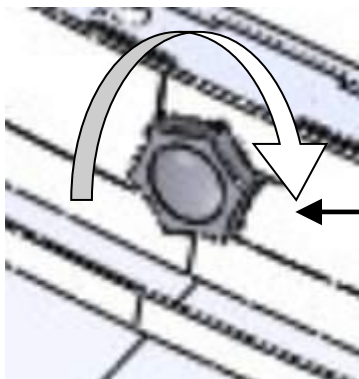


電池更換說明


1.

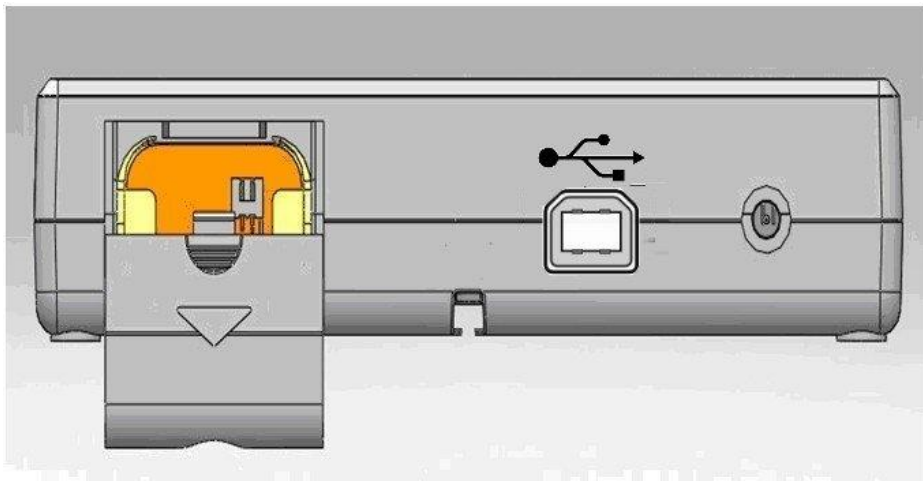


2.

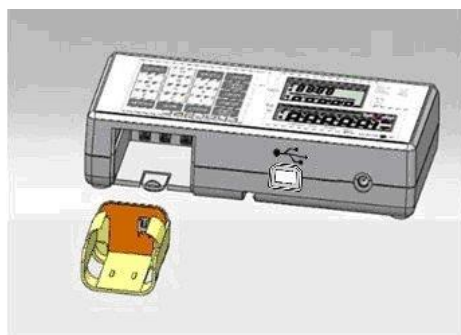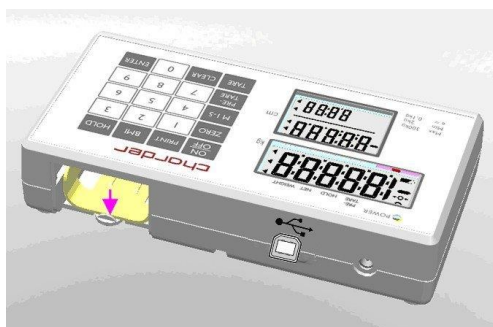


3.

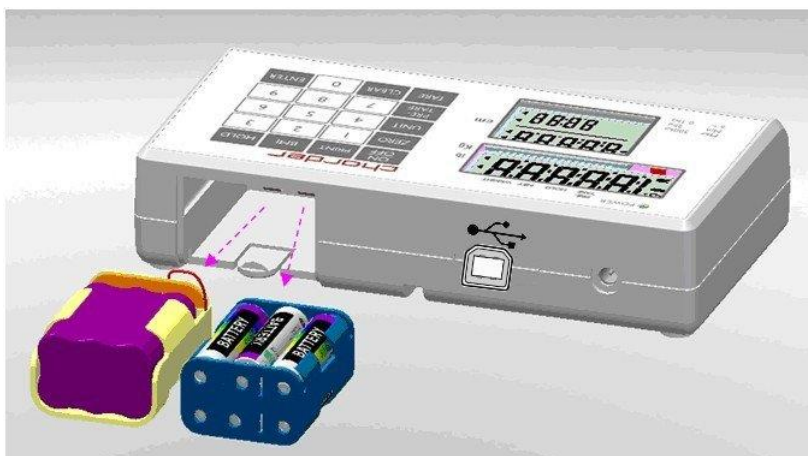



4.

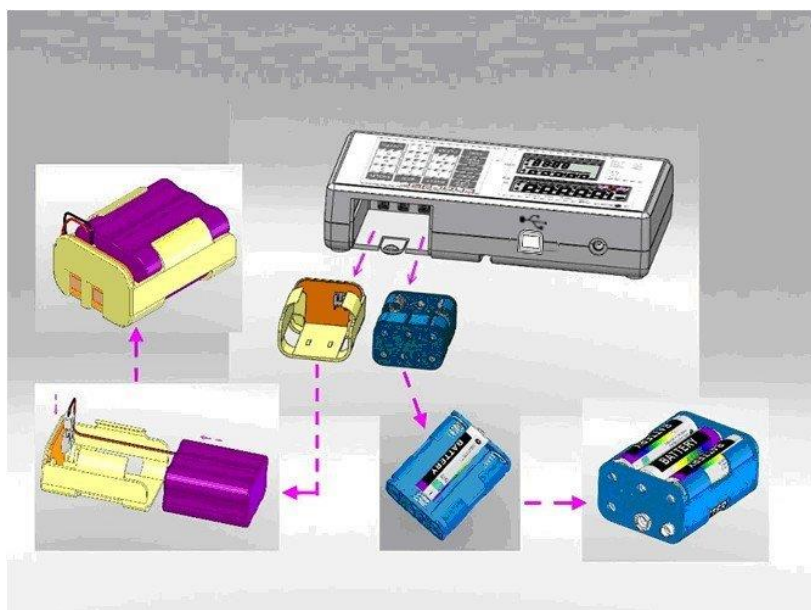

5.

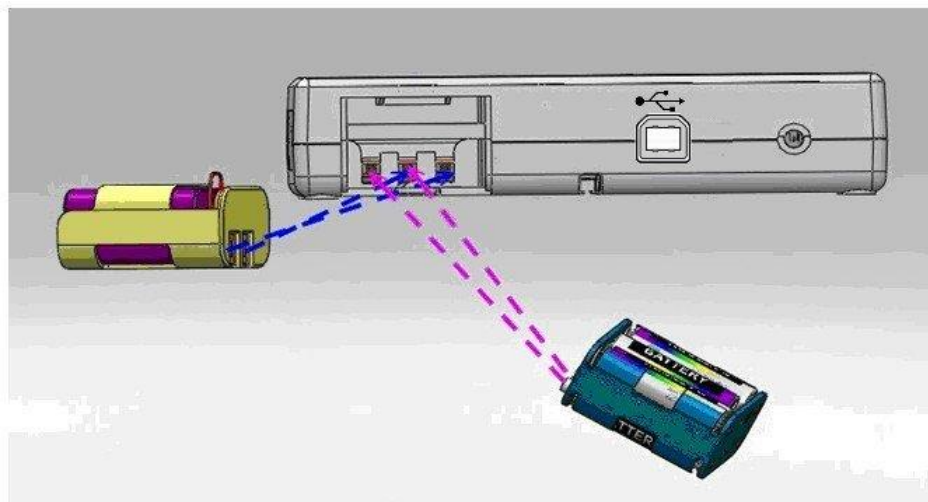

將電池放回顯示器，並留意電池極性方向

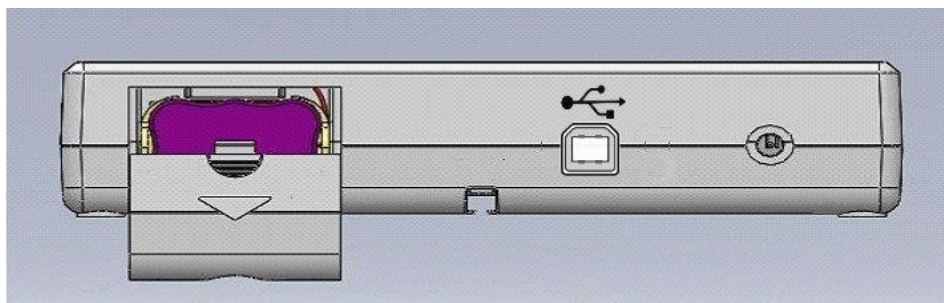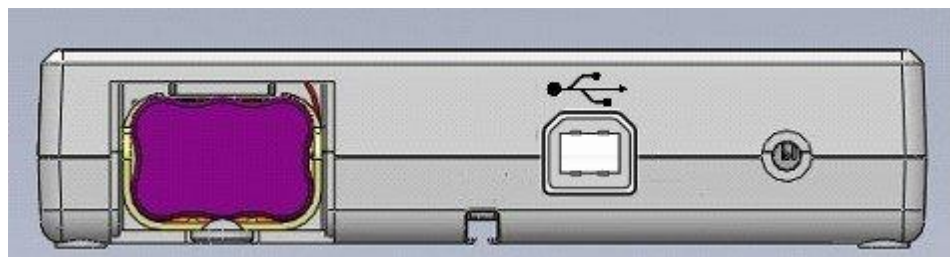

錯誤訊息

■ 電量不足

出現此符號時代表電池電量不足，請立即更換電池或插上原廠提供的變壓器作為電源供應。




■ 內部量測值過低

內部起始量測值過低，請移除秤上物品重新開機一次，或增加重量後再開機測試是否恢復正常，如狀況仍持續出現請通知您的經銷商。



■ 超載或內部量測起始值過高

內部起始量測值過高，請移除秤上物品重新開機一次，如狀況仍持續出現請通知您的經銷商。

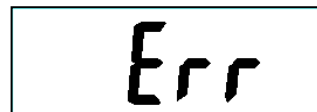

■ 內部程式錯誤

內部程式錯誤，請通知您的經銷商作維修。



[illegible]

符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產：



歐盟有害物質限用指令 (RoHS)

本產品符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修訂指令 (EU) 2015/863 之規範

歐盟無線設備指令 (RED)

本產品符合無線設備指令 2014/53/EU (RED)
(適用於具備無線傳輸功能之版本)

美國聯邦通信委員會 (FCC) 規範

本產品符合 FCC 規範第 15 部分之規定
(適用於具備無線傳輸功能之版本)

製造業者名稱: 啟德電子股份有限公司

製造業者地址: 臺中市大里區國中路 103 號

CD-IN-1429 [16267E] 02/2026