



TP2100

IMPRIMANTE THERMO MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Conservez le manuel d'instructions à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

TABLE DES MATIÈRES

<i>AVERTISSEMENT DE RISQUE DE CHOC</i>	1
<i>AVERTISSEMENT AUX MÉDIAS</i>	1
<i>INDICE DE REPOSITIONNEMENT</i>	1
<i>IMPRIMANTE ET STATIF À LED</i>	1
<i>CONNAÎTRE SON IMPRIMANTE</i>	2
<i>COMMENT UTILISER VOTRE IMPRIMANTE</i>	3
<i>CHANGEMENT DU ROULEAU DE PAPIER</i>	4
<i>ASSEMBLAGE AVEC LA SÉRIE DE BALANCES MS49</i>	5
<i>À ASSEMBLER AVEC LA COLONNE DE LA SÉRIE MS39</i>	6
<i>TP2100 Assembler avec la balance à colonne MS39/MS49 avec le support de la tige de hauteur</i>	7
<i>SPECIFICATION</i>	9
<i>MESSAGES D'ERREUR</i>	10



AVERTISSEMENT DE RISQUE DE CHOC

L'imprimante et le bloc d'alimentation ne doivent jamais être utilisés dans un endroit où l'un ou l'autre pourrait être mouillé. Des blessures pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT AUX MÉDIAS

Utilisez toujours un rouleau de papier de haute qualité approuvé par Charder. Les fournitures approuvées peuvent être commandées auprès de votre revendeur.

INDICE DE REPOSITIONNEMENT



Si l'imprimante n'a plus de rouleau de papier pendant l'impression, éteindre l'appareil et recharger le rouleau de papier. Mettez l'imprimante sous tension et recommencez l'impression.

IMPRIMANTE ET STATIF À LED

État de l'imprimante	État des diodes électroluminescentes
OFF	OFF
ON	LE VOYANT VERT CLIGNOTE PENDANT 3 SECONDES → LE VOYANT VERT EST ALLUMÉ EN PERMANENCE (EN COURS D'UTILISATION)
MANQUER DE PAPIER	VOYANT ROUGE ALLUMÉ
TENSION 6V±10% SURCHARGE/TROP BAS	LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE
TEMP. VÉRIFICATION / SURCHAUFFE	VOYANT ORANGE ALLUMÉ


※ Le voyant vert continue de clignoter lors de la mise sous tension ou Le voyant vert reste allumé (sans clignoter) lorsque la mise sous tension est anormale.

CONNAÎTRE SON IMPRIMANTE

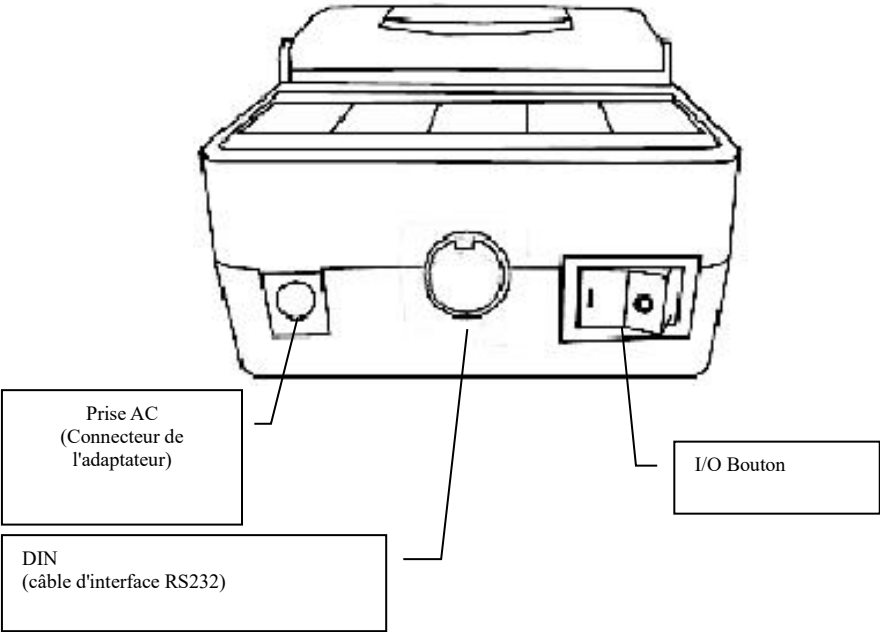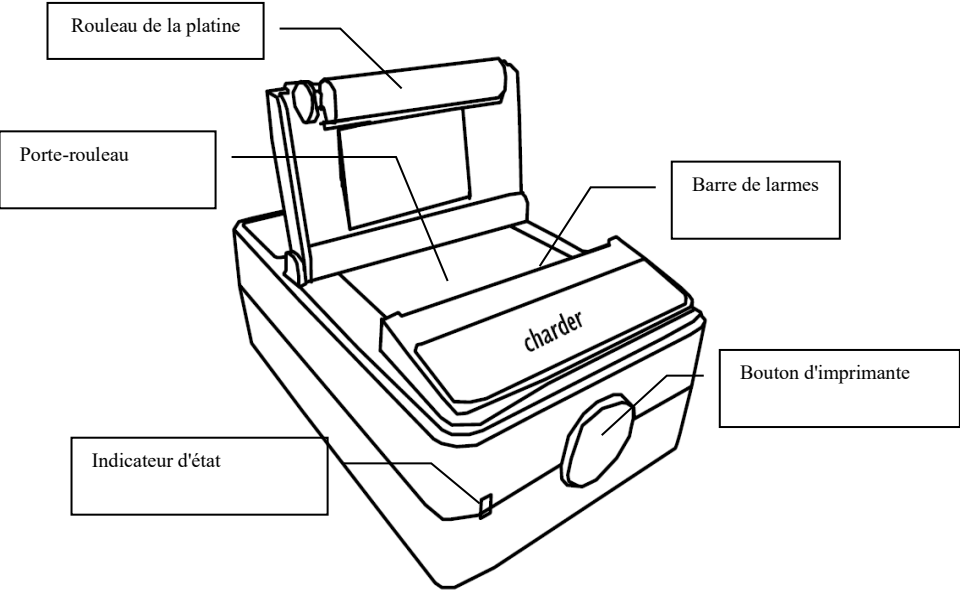



COMMENT UTILISER VOTRE IMPRIMANTE

Brancher l'adaptateur secteur et le câble d'interface. Appuyer sur le bouton I/O pour mettre l'imprimante sous tension.

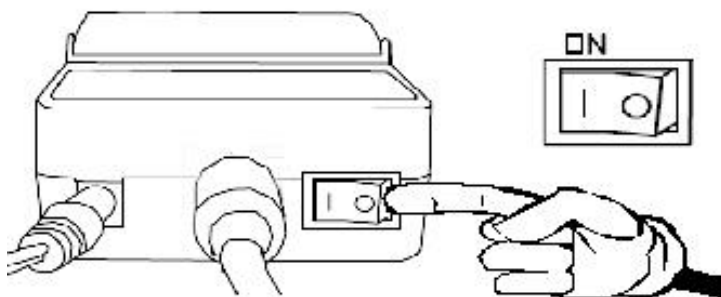

Le TP-2100 peut se connecter via le port RS232 avec les balances numériques Charder qui ont des capacités de sortie série RS232, y compris toute balance médicale équipée de l'indicateur de poids des séries DP-34 & DP-37.


Appuyer sur la touche
PRINT.

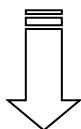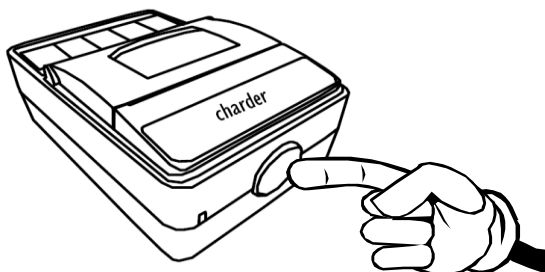

Imprimer.




Le TP-2100 peut se connecter via le port RS232 avec une balance numérique Charder qui a des capacités de sortie de type USB B, y compris toute balance médicale équipée de l'afficheur de poids DP3710.

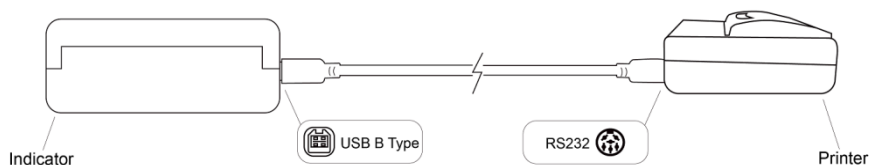


CHANGEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

Pour changer les rouleaux de papier d'une imprimante TP2100, procédez comme suit : Ouvrez le couvercle supérieur et positionnez le rouleau de papier de manière à ce qu'il tourne dans le bon sens.

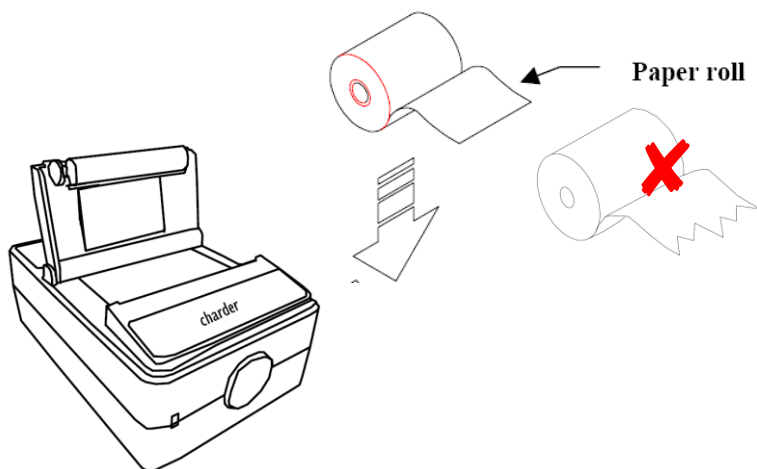


AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le bord du papier est droit avant de l'insérer dans l'appareil.

Faites passer l'extrémité du rouleau de papier par le couvercle de l'imprimante et fermez le couvercle.
L'imprimante est prête à imprimer.

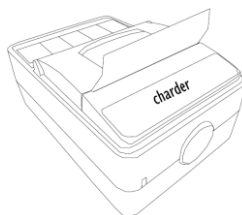

ASSEMBLAGE AVEC LA SÉRIE DE BALANCES MS49

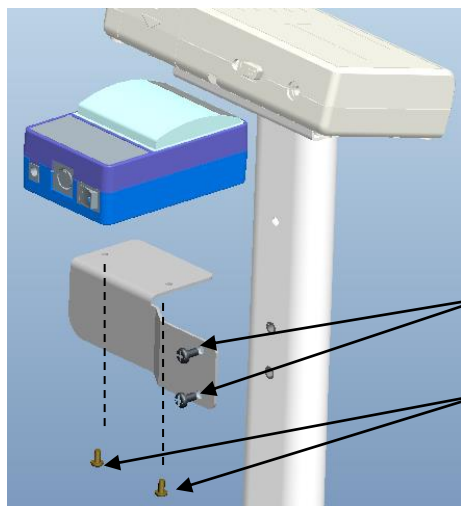


Vis à tête cylindrique M5*0,8*15mm

Vis à tête cruciforme M4*0,7*6mm

Objet	Pièces détachées	Qté
1	Vis à tête cylindrique M5*0,8*15mm	2
2	Vis à tête cruciforme M4*0,7*6mm	2




À ASSEMBLER AVEC LA COLONNE DE LA SÉRIE MS39

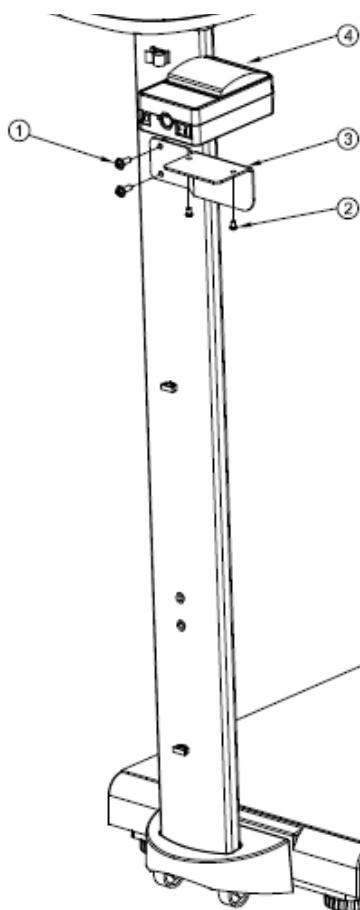


Objet	Pièces détachées	Qté
1	Vis à tête cylindrique M5*0,8*15mm	2
2	Vis à tête cruciforme M4*0,7*6mm	2
3	Support d'imprimante	1
4	Imprimante TP2100	1

TP2100 Assembler avec la balance à colonne MS39/MS49 avec le support de la tige de hauteur

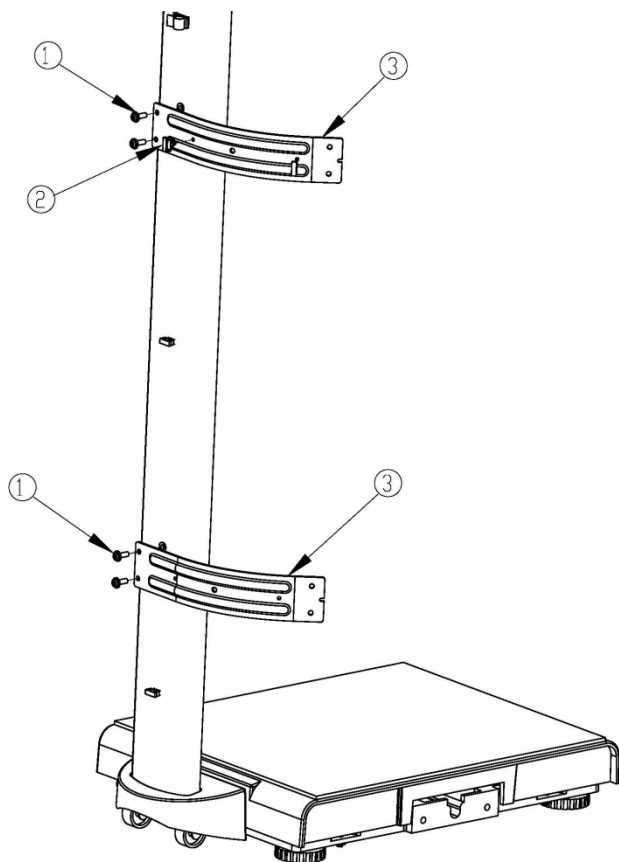

Objet	Pièces détachées	Qté.
1	Vis à tête cylindrique M5*0,8*11mm	4
2	Manchon isolant	2
3	Support de la tige HM-200D/HM-201D	2

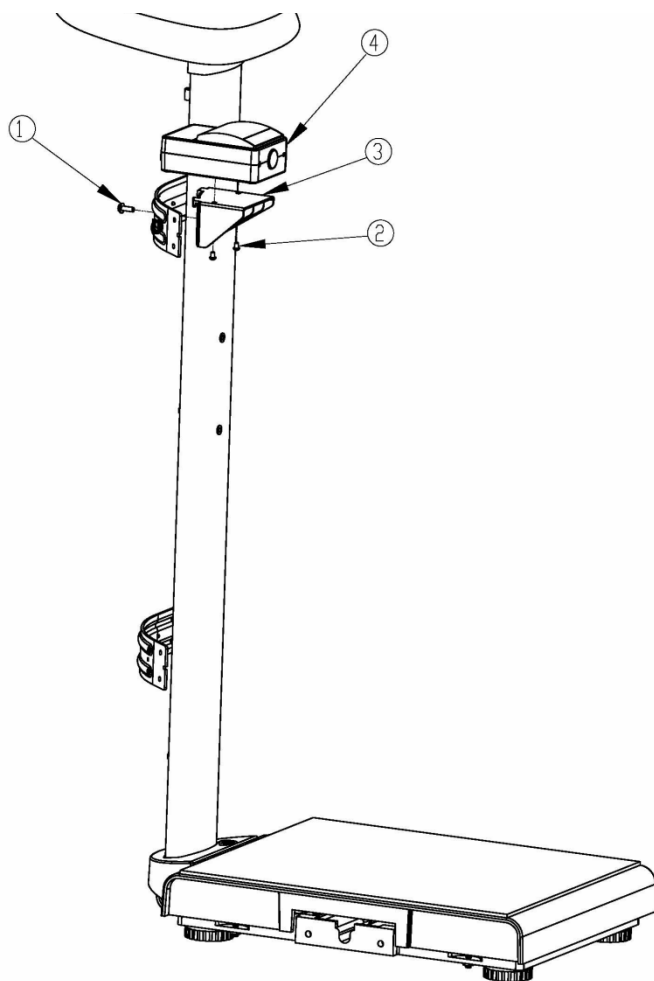

Objet	Pièces détachées	Description	Qté
1	Vis à tête M5*15L	Pour fixer le support de l'imprimante sur le support	1
2	Vis pour le support de l'imprimante	Pour fixer l'imprimante sur le support	2
3	Soutien aux imprimantes	Pour prendre en charge l'imprimante.	1
4	Imprimante thermique TP2100	Imprimante thermique	1

SPECIFICATION

POINT	SPECIFICATION
Méthode d'impression	Impression thermique par ligne de points
Nombre de points	384 points/ligne
Résolution (points/mm)	8 points/mm
Largeur d'impression (mm)	48 mm
Épaisseur maximale du papier (um)	80 um
Papier	57.5±0.5 mm (W) x ψ30mm max
Chargement du papier	Chargement facile
Vitesse d'impression (mm/s)	75 mm/s
Dimensions (L x W x H)	120 x 80 x 50mm
Température de fonctionnement (°C)	0°C à 50°C (mouvement de l'imprimante) 0°C à 40°C (imprimante)
Humidité de fonctionnement (%)	20% à 85% (mouvement de l'imprimante) 15% à 85% (imprimante)
Interface	Conforme à RS232
Plage de tension (adaptateur)	12V 2A

Note: n'utiliser que l'adaptateur fourni à l'origine avec le TP-2100 ou par Charder.

MESSAGES D'ERREUR

Problème	Solution ou Raison
Ne s'allume pas lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position ON (I).	Vérifier les connexions d'alimentation de la prise CA à l'alimentation de l'imprimante.
S'allume en vert, mais l'imprimante n'imprime pas.	Vérifier les connexions du câble d'interface entre la balance et l'imprimante. Vérifier que le couvercle supérieur est fermé et verrouillé.
Bourrage papier de l'imprimante.	Réinitialisez le rouleau de papier. Voir "CHANGEMENT DU ROULEAU DE PAPIER" (page 4) .
Clignote en vert.	Le rouleau de papier est épuisé. Rechargez un nouveau rouleau de papier pour que l'imprimante puisse continuer à imprimer.



Déclaration de conformité du fabricant

Ce produit a été fabriqué conformément aux normes harmonisées de l'Union européenne, selon les dispositions des directives suivantes

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

Directive basse tension 2014/35/EU

Directive RoHS 2011/65/EU et directive déléguée (UE) 2015/863



Abilanx

Park Avenue Rue Léon Griffon
56890 Saint Avé France
TEL: +33 02 97 63 70 46
contact@abilanx.com
www.abilanx.com



Manufactured by:

Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41262 ,Taiwan

CD-IN-00642 REV003 05/2026