

使用說明書


HM202P

身高尺



請妥善保存此說明書以供未來查閱之用。

標籤圖示說明(請對照產品本身的標籤)

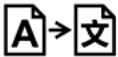	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	製造商的名稱地址以及產品生產國家		B 類人體接觸設備
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品類別
	產品型錄編號		醫療器材單一識別碼
	生產批次		產品序號
		歐盟代表	
		(度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品	
		設備符合歐盟醫療器材指令 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC. 四位數字表示發證單位代號	
		(度量衡認證機種限定) 產品符合度量衡三級認證	
		(度量衡認證機種限定) M: 符合 2014/31/EU 非自動衡器規範 22: 認證確效年份 (例: 22 = 2022) 0122: 度量衡發證單位編號	
		表示進口商與其地址	
		表示協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址	



警告

本產品非醫療器材僅作為重量測量用途；使用前應詳閱使用說明書

版權宣告

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約保護。未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或產生費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

目錄

I. 安全須知	5
II. 組裝.....	7
III. 產品操作	13
IV. 產品規格.....	15
V. 符合性宣告頁.....	16

I. 安全須知

A. 前言

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品時遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用及日常維護方式等重要資訊。

產品用途

此產品應由專業人士操作，用來量測受測者的身高。

安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照電子產品相關安全規範操作產品
- 安裝不當將使保固失效
- 產品應在室內使用

產品清潔

- 產品表面建議使用柔軟無絨布搭配 70%-75%酒精進行清潔。
- 請勿使用大量的清水清洗，以免造成內部電子零件的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或清潔液清潔產品。

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業，不在保固範圍內

意外事件回報

與設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商、歐盟代表（如果設備在歐盟成員國使用）和用戶/主體成員國的主管當局。

II. 組裝

零件

項目	名稱	數量
1.	支撐柱	1
2.	壓頭板	1
3.	底盤	1
4.	身高尺管	4
5.	捲尺組	1
6.	搭配秤子MS6111滑塊 (紅)	1
7	搭配秤子MS6110滑塊 (白)	1
8	使用說明書	1



1. 支撐柱



2. 壓頭板



3. 底盤



4. 身高尺管



5. 捲尺組




6. 滑塊 (紅) 或




7. 滑塊 (白)


組裝

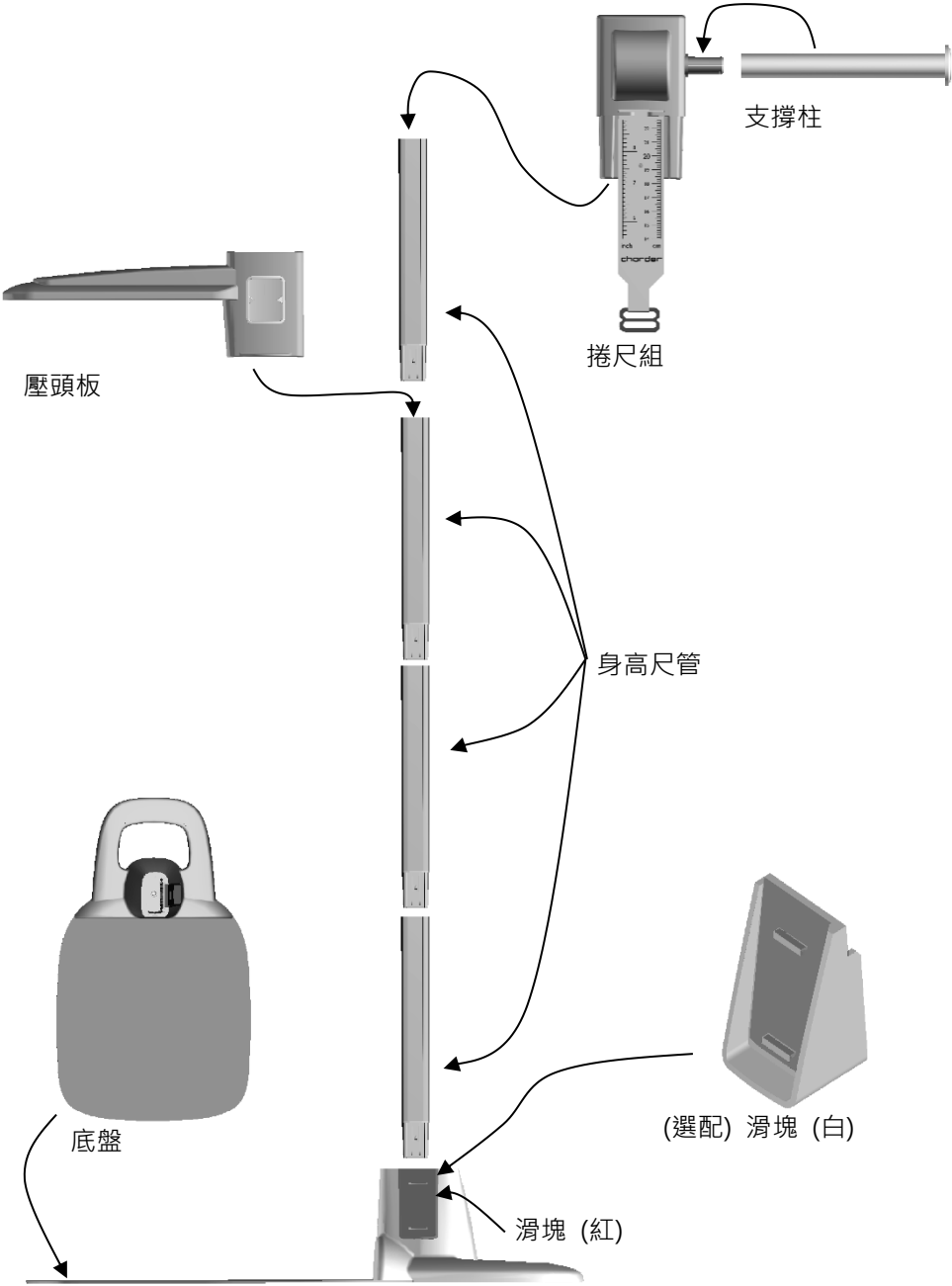


1. 將支撐柱組裝在捲尺組上

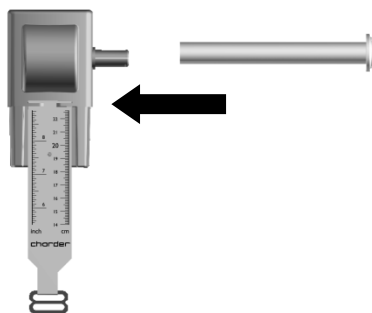

2. 將捲尺往下拉,並將其中一段身高尺管套入捲尺組內

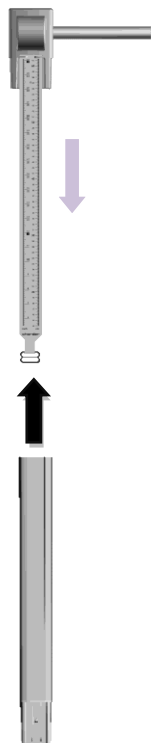

3. 將壓頭板套進最上層的身高尺管中

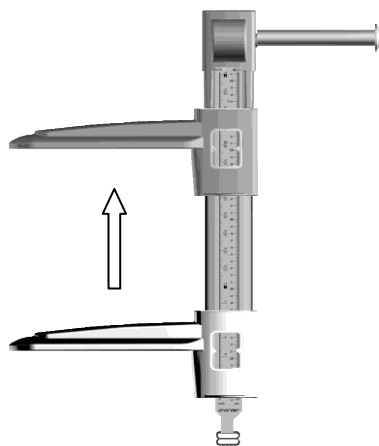


4. 將身高尺管以及底盤組裝在一起


5. 將捲尺的掛鉤扣在滑塊上

搭配秤子使用時：最上端的凹槽

無搭配秤子使用時：最下端的凹槽

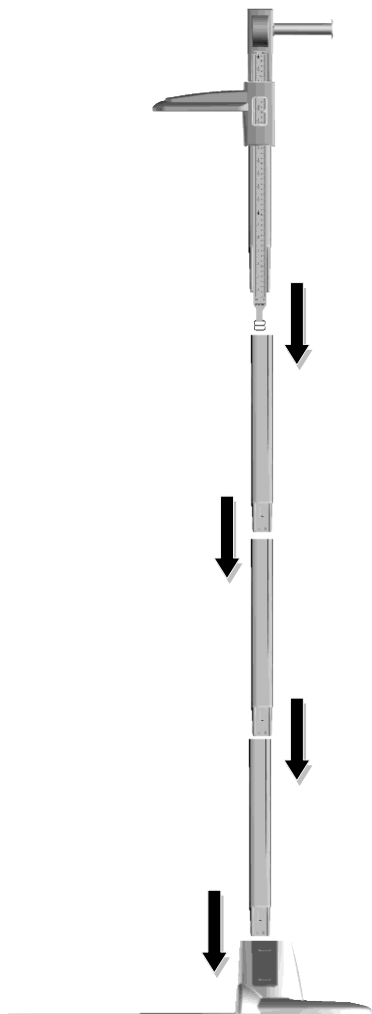

包裝

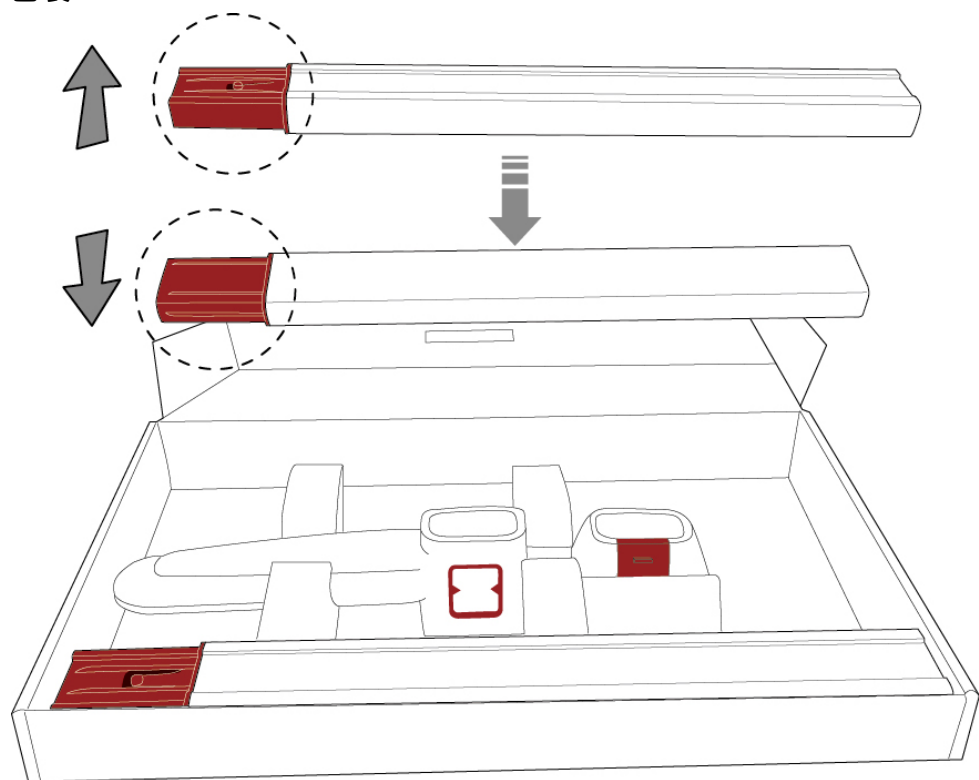


如上圖所示，小心地將 HM202P 重新包裝在攜帶箱中，避免損壞產品。

III. 產品操作

無搭配秤台使用時

如果沒有搭配啟德的秤台 (MS6110 或 MS6111) 連接 HM202P , 請將捲尺上的掛鉤扣在滑塊最下端的凹槽

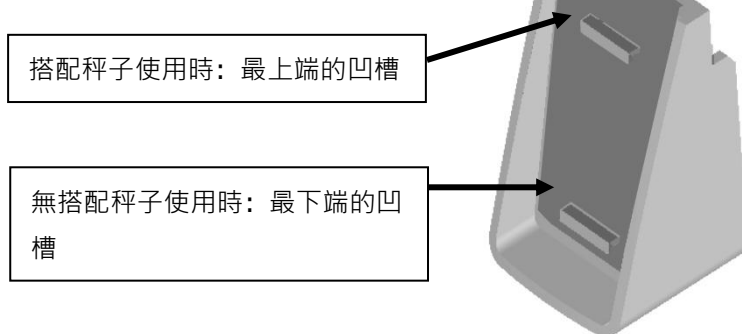

搭配秤子使用時 (MS6110 或 MS6111)

請將捲尺上的掛鉤扣在滑塊最上端的凹槽



如果 HM202P 與 MS6110 (有 4 個調整腳) 一起使用 , 則應使用白色滑塊。

如果 HM202P 與 MS6111 (無調整腳) 一起使用 , 則應使用紅色滑塊。

產品操作流程

1. 將支撐柱緊靠於牆上



2. 測量時請確保受測者站直，將壓頭板向下移動直到輕微碰觸到受測者頭頂
此時可經由身高尺指針位置讀取身高數值



IV. 產品規格

產品型號		HM202P
身高測量	量程	20-205 cm 8-81 in
	精準度	1 mm 1/16 in
	誤差範圍	±10 mm
產品尺寸	全尺寸	406(W) x 585(D) x 2200(H) mm
	底盤	406(W) x 365(D) mm
產品重量 (大約)		3.8 kg / 8.4 lb (Carry case 1.1 kg / 2.4 lb)
操作溫度 & 濕度		5°C~35°C

V. 符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產

	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Medical Device Directive Classification: Class I with measuring function
---	---

**RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU)
2015/863**

授權歐洲代表



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號,

CD-IN-00015 REV004 2023/04