


MS3830

輪椅與擔架秤

高承載 MS3830 輪椅與擔架秤可攜式設計，搭配滾輪腳輪，移動運送更省力。亦可作為肥胖秤使用，特別是加裝選配扶手時，能提供更穩固的支撐，適合無法獨立站立的患者量測。透過秤重的扣重 (Tare) 功能扣除輪椅或擔架重量，即可精準量得患者的實際體重。

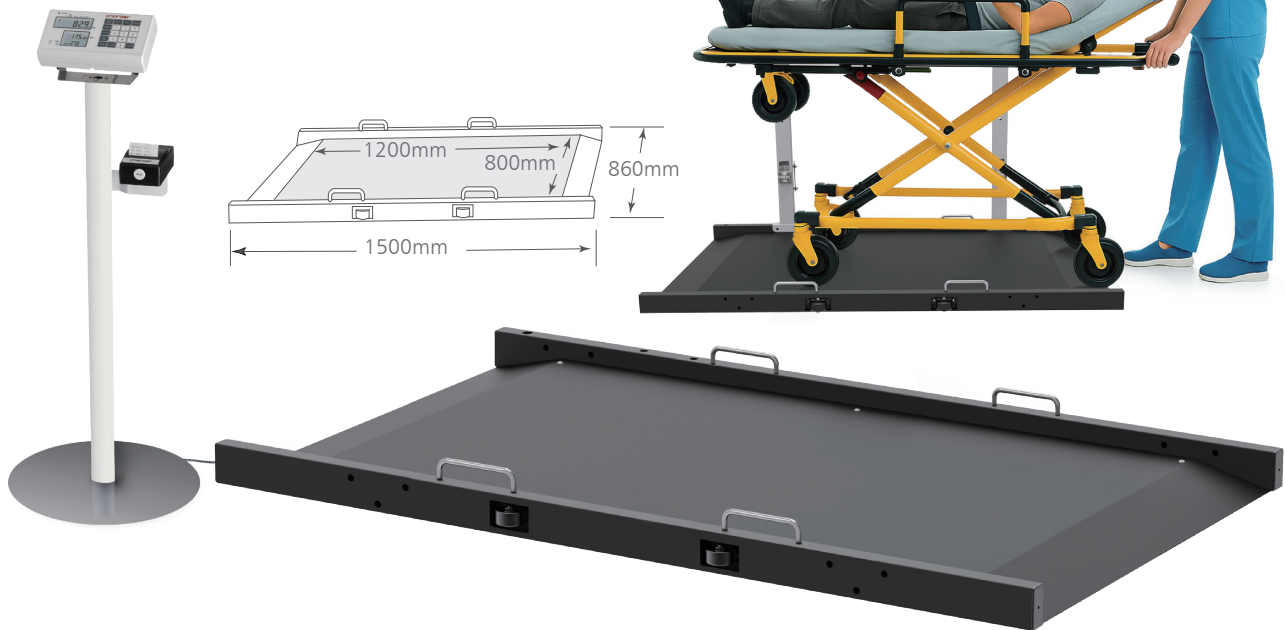

基本配備含指示器；指示器立架、熱感印表機與顯示扶手為選配。

功能特色

- BMI
- 列印
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 背光螢幕
- 雙向緩坡
- 水平儀
- 內建輪子
- 移動手把
- 資料傳輸

產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	1500(W) x 860(D) x 66(H) mm (不含扶手)
平台尺寸	1200(W) x 800(D) mm
產品重量	47 kg
電源供應	AA 電池 ×6 / 電源變壓器 / 充電式電池組 (選配)
選配配件	熱感印表機 SM-2714 顯示器支撐架 折疊扶手組
資料傳輸	USB, 無線 (選配)



好握提把，搬運更輕鬆



內建移動輪



折疊式扶手，方便收納與移動