




MS6001

病床秤


使用時，僅需將病床推到秤台上，按預扣重鍵扣掉病床重量後，即可測量受測者的體重。低秤台的設計增加量測安全性，及協助醫療人員觀察病患的狀態。

秤台內建輪子和攜帶手把，讓醫療人員移動秤台更輕鬆，可依需求搬移到病房內使用。

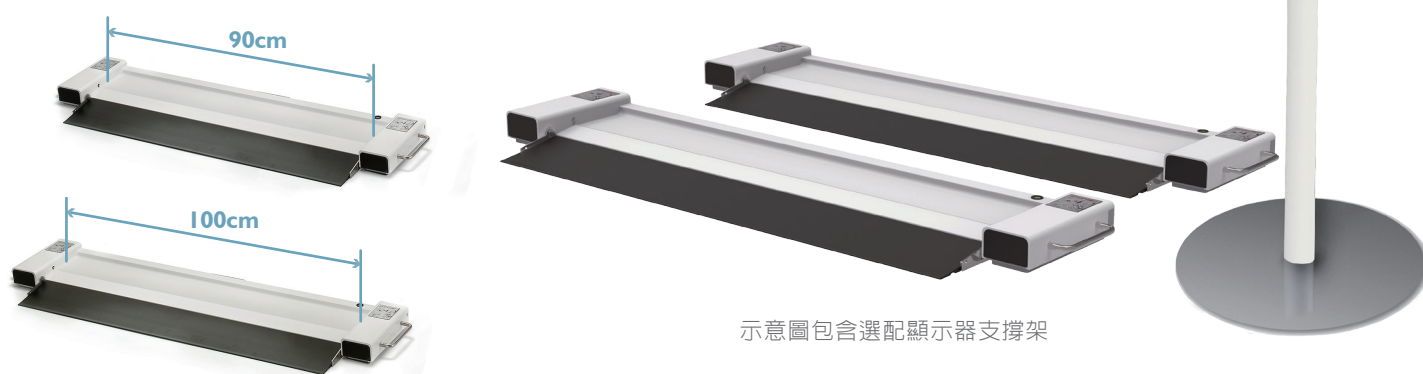


功能特色

- BMI
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- LCD 背光顯示
- 移動輪子
- 攜帶手把
- 水平儀
- 摺疊式緩斜坡

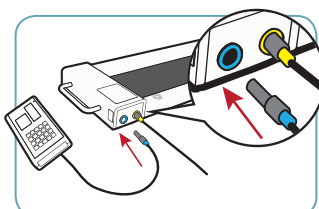

組裝容易

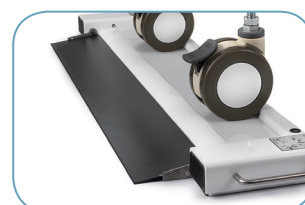

輕鬆將病床推到秤台上



秤台內建輪子



攜帶手把

產品規格

量程	600 kg
精度	0.1 kg
尺寸	1256(W) x 366(D) x 61.5(H) mm
產品重量	11.4 kg (各秤台)
配件	SM-2714 顯示器支撐架
資料傳輸	USB
軟體	Smart Data Manager