


MS6001

Báscula de cama


La báscula digital de cama Charder MS6001 permite pesar de forma sencilla y precisa a pacientes encamados y es indispensable en diálisis y cuidados intensivos. Dos básculas portátiles se colocan junto a las ruedas de la cama, y esta se desliza sobre la báscula de forma segura.

Además, el MS6001 puede colocarse debajo de la cama del paciente para monitorizar de cerca su peso dentro de un rango establecido. Si el peso del paciente fluctúa fuera de dicho rango, una alarma sonará para alertar al personal médico.

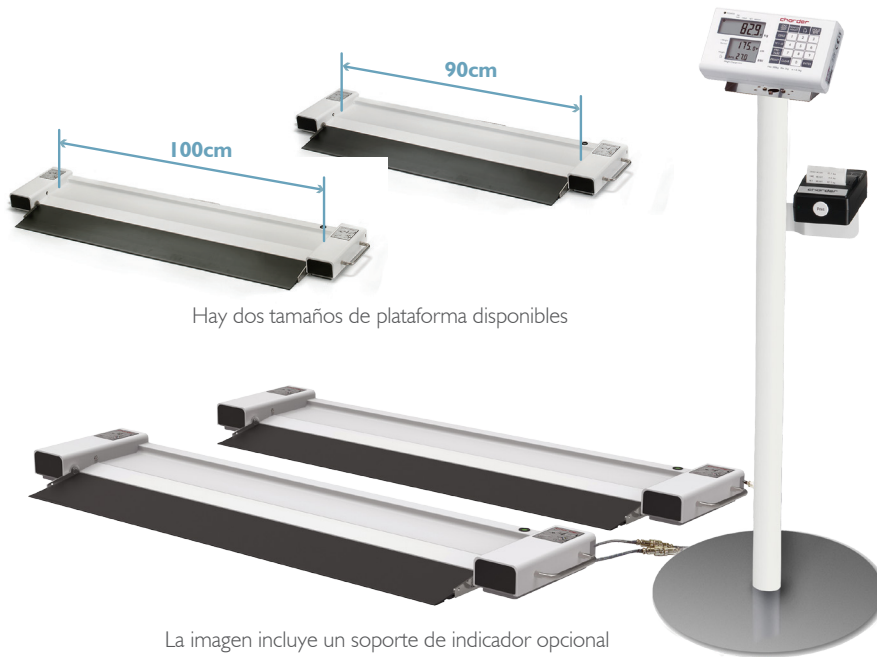


Hay dos tamaños de plataforma disponibles

La imagen incluye un soporte de indicador opcional

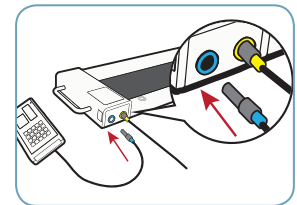

Conectores codificados por colores para una fácil instalación

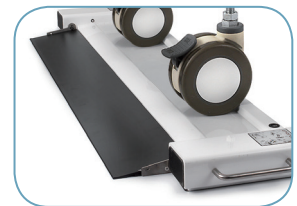

Empuje la cama sobre la báscula mediante rampas plegables



Ruedas giratorias incorporadas



Asas para portabilidad



La impresora térmica imprime el registro de resultados para referencia del paciente.

Funciones

- IMC
- Pre-tara
- Alarma de cambio de peso
- Imprimir
- Cambio de unidad (kg/lb)
- Ruedas giratorias
- Sostener
- Indicador de nivel de burbuja
- Asa portátil
- Tara
- Pies ajustables
- Transferencia de datos inalámbrica (opcional)

Presupuesto

Capacidad	600 kilos
Graduación	0,1 kg < 300 kg > 0,2 kg
Dimensiones generales	1256 (ancho) x 366 (profundidad) x 61,5 (alto) mm
Platform Dimensions	1000 (ancho) x 160 (profundidad) mm
Device Weight	11,4 kg (por viga)
Power Supply	Pilas AA / Adaptador de corriente Pila recargable (opcional)
Data Transfer	USB, inalámbrico (opcional)
Accessories	Soporte indicador, impresora térmica